



**FKG**  
swiss endo

# RACE® EVO



**НАСЛЕДИЕ  
RACE**

**БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. МЯГКИЙ КОНТРОЛЬ.**

[www.fkg.ch/race-evo](http://www.fkg.ch/race-evo)

# Наследие, улучшенное эволюцией

**RACE® EVO** - вершина эволюции нашей хорошо известной и проверенной временем ротационной системы RaCe. Высокая надежность оригинальной линейки RaCe в сочетании с термообработкой и более высокой скоростью вращения делают инструменты **RACE® EVO** безопаснее и эффективнее чем когда-либо, с лучшим контролем.



Эксклюзивная термообработка, дополнившая унаследованные характеристики RaCe, дает превосходное сочетание прочности, долговечности и контроля. Непревзойденная устойчивость к циклической усталости, оптимизированная, но при этом не агрессивная режущая способность и низкий эффект вкручивания говорят о том, что **RACE® EVO** созданы быть безопасными.

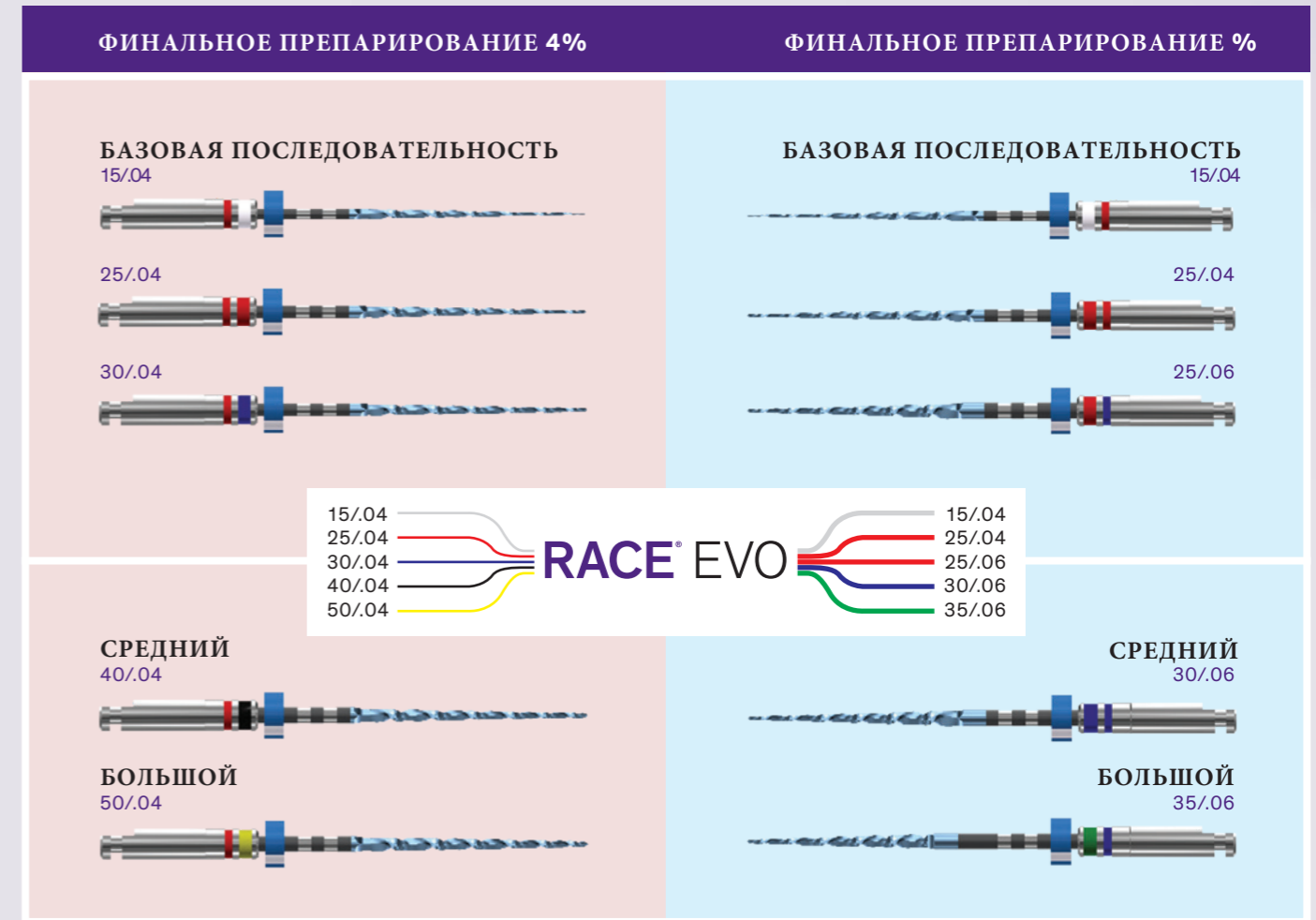
Специальная термообработка **RACE® EVO** обеспечивает беспрецедентные механические свойства, которые, в свою очередь, позволяют работать на более высокой скорости вращения для более быстрого и комфортного лечения пациентов.

Дизайн RaCe и свыше 20 лет надежной работы на более высокой скорости вращения, делают инструменты **RACE® EVO** привычными для руки, при этом они работают с повышенной эффективностью.

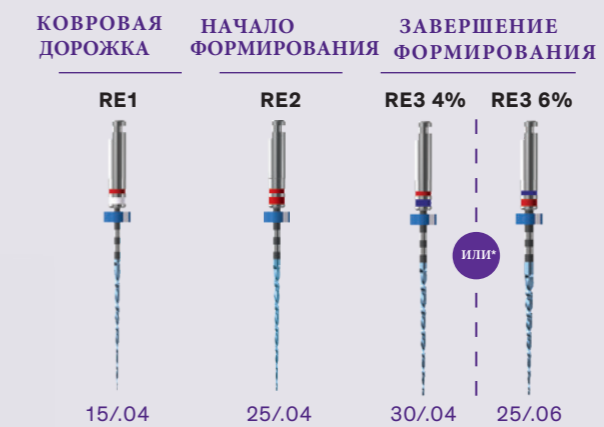
\* FKG рекомендует работать инструментами **RACE® EVO** на 1,000 об./мин.

# Ваш подход. Ваш выбор.

С **RACE® EVO** вы можете выбрать терапевтический подход. Мы предлагаем выбор инструментов, который позволяет успешно лечить каналы с любой анатомией. Просто начните с базовой последовательности в наборе, затем, при необходимости, переходите к следующему размеру для формирования широких каналов.



## ОДИН НАБОР ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ



\* Выбор инструмента для формирования канала зависит от вашего терапевтического подхода

## Повышенная гибкость для нового уровня уверенности

Инструментам **RACE® EVO** присущи характерные особенности дизайна RaCe, но с дополнительным преимуществом повышенной гибкости. Уникальный процесс термообработки, узнаваемый по синему цвету инструмента, повышает гибкость в 1,4 раза по сравнению с RaCe, что повышает производительность и способствует более плавному продвижению в канале.



До



После

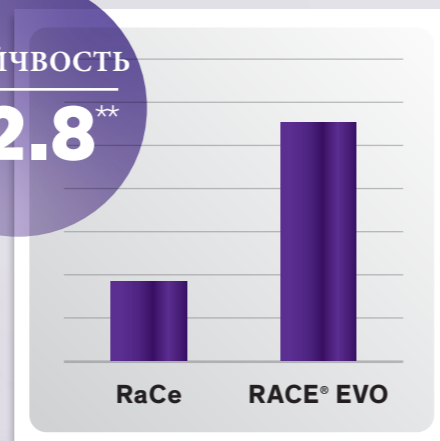
© Dr. Andreas Krokidis (Греция), все права сохранены.

ГИБКОСТЬ  
**x 1.4\***

## Повышенная устойчивость к циклической усталости

У инструментов **RACE® EVO** устойчивость к циклической усталости в 2,8 раза выше, чем у их предшественников - RaCe. Это снижает риск поломки инструмента и делает возможным работу на более высокой скорости вращения, повышая безопасность и комфорт пациента в целом.

УСТОЙЧИВОСТЬ  
**x 2.8\*\***



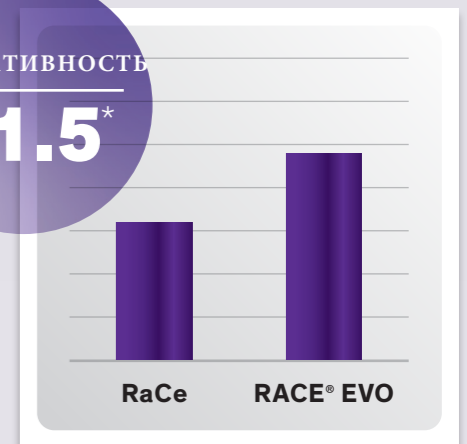
\* Основано на результатах внутреннего лабораторного тестирования с использованием RACE® EVO 4%.

\*\* Основано на результатах внутреннего лабораторного тестирования; время перелома при рекомендованной скорости

## Улучшенная режущая эффективность

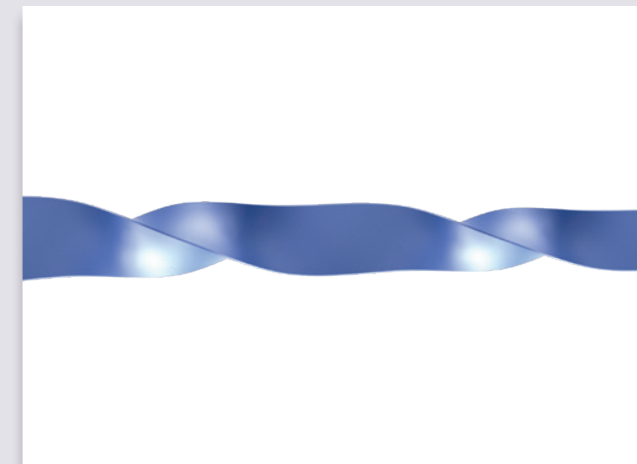
Треугольное поперечное сечение **RACE® EVO** с острыми режущими гранями вместе с высокой скоростью вращения повышает режущую эффективность по сравнению с RaCe в 1,5 раза.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
**x 1.5\***



## Более 20 лет мы руководствуемся абсолютным контролем

Помимо повышенной гибкости, повышенной устойчивости к циклической усталости и улучшенной режущей способности, инструменты **RACE® EVO** имеют все те же неоспоримые преимущества, что и проверенный временем дизайн линейки RaCe.



Эксклюзивный дизайн нашего запатентованного переменного режущего края снижает эффект вкручивания, помогает лучше контролировать продвижение инструмента в канале.



Уникальный дизайн закругленного безопасного кончика **RACE® EVO** способствует эффективному продвижению инструмента в канале.

\* Основано на результатах внутреннего лабораторного тестирования с использованием RACE® EVO 4%.

# RACE® EVO

Преимущества дизайна RaCe в сочетании с термообработкой и более высокой скоростью вращения:



**+ 40%\***

повышенная гибкость

**x 2.8\***




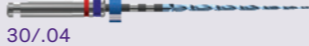


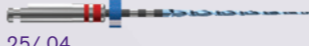
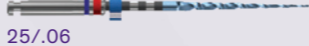









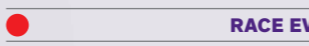
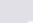
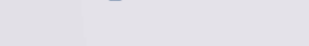



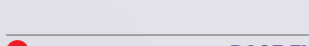

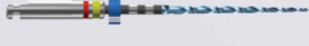

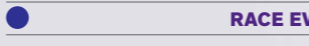
повышенная устойчивость к циклической усталости


**+ 50%\***

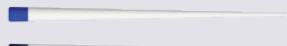





улучшенная режущая эффективность

\* Основано на результатах внутреннего лабораторного тестирования с использованием RACE® EVO 4%.

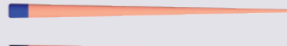
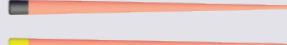
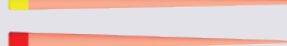
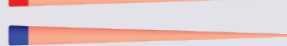
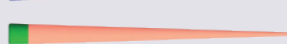
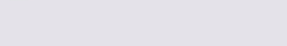
## Наименования и артикулы

НАБОРЫ		
<b>набор RACE EVO 4%</b>		
		3× 21mm S1.7B0.00.SCV.FK 15/.04
		3× 25mm S1.7B0.00.SCW.FK 25/.04
		3× 31mm S1.7B0.00.SCX.FK 30/.04
<b>набор RACE EVO 6%</b>		
		3× 21mm S1.7B0.00.SCY.FK 15/.04
		3× 25mm S1.7B0.00.SCZ.FK 25/.04
		3× 31mm S1.7B0.00.SDA.FK 25/.06
ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		
<b>RACE EVO 15/.04</b>		
		6× 21mm S1.7B0.00.ODG.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0FZ.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DH.FK
<b>RACE EVO 25/.04</b>		
		6× 21mm S1.7B0.00.ODI.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GB.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DJ.FK
<b>RACE EVO 30/.04</b>		
		6× 21mm S1.7B0.00.0DK.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GC.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DL.FK
<b>RACE EVO 40/.04</b>		
		6× 21mm S1.7B0.00.0DM.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GE.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DN.FK
<b>RACE EVO 50/.04</b>		
		6× 21mm S1.7B0.00.0DO.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GF.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DP.FK
<b>RACE EVO 25/.06</b>		
		6× 21mm S1.7B0.00.0DQ.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GH.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DU.FK
<b>RACE EVO 30/.06</b>		
		6× 21mm S1.7B0.00.0DV.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GI.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0DW.FK
<b>RACE EVO 35/.06</b>		
		6× 21mm S1.7B0.00.0DX.FK
		6× 25mm S1.7B0.00.0GJ.FK
		6× 31mm S1.7B0.00.0GU.FK

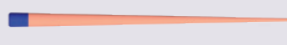

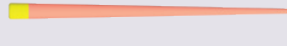
 4% подход  6% подход

БУМАЖНЫЕ ШТИФТЫ		
200 бумажных штифтов в уп.		
	<b>30/.04</b>	08.610.04.030.BC
	<b>40/.04</b>	08.610.04.040.BC
	<b>50/.04</b>	08.610.04.050.BC
	<b>25/.06</b>	08.610.06.025.BC
	<b>30/.06</b>	08.610.06.030.BC
	<b>35/.06</b>	08.610.06.035.BC

ГУТТАПЕРЧА		
60 штифтов гуттаперчи в уп.		
	<b>30/.04</b>	08.600.04.030.RE
	<b>40/.04</b>	08.600.04.040.RE
	<b>50/.04</b>	08.600.04.050.RE
	<b>25/.06</b>	08.600.06.025.RE
	<b>30/.06</b>	08.600.06.030.RE
	<b>35/.06</b>	08.600.06.035.RE

TOTALFILL® BC POINTS™		
60 штифтов BC в уп.		
	<b>30/.04</b>	08.650.04.030.RE
	<b>40/.04</b>	08.650.04.040.RE
	<b>50/.04</b>	08.650.04.050.RE
	<b>25/.06</b>	08.650.06.025.RE
	<b>30/.06</b>	08.650.06.030.RE
	<b>35/.06</b>	08.650.06.035.RE

TOTALFILL® BC SEALER™		
Шприц 2g + 15 насадок TotalFill BC		
		08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
60 штифтов BC Points HiFlow в уп.		
	<b>30/.04</b>	08.650.04.030.HF
	<b>40/.04</b>	08.650.04.040.HF
	<b>50/.04</b>	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW		
Шприц 1.5g + 15 насадок TotalFill BC		
		08.650.00.008.XX

[www.fkg.ch/race-evo](http://www.fkg.ch/race-evo)

**FKG Dentaire SA**  
Crêt-du-Loche 4  
CH-2304 La Chaux-de-Fonds  
Швейцария  
T +41 32 924 22 44

[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)  
[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)

