

קטלוג 2024



**Dentorient Fuss**

Since 1950

[WWW.IDENTAL.CO.IL](http://WWW.IDENTAL.CO.IL)

תודה שבחרתם בחברת דנטאוריינט פוס לצרכי המרפאה ו/או המעבדה שלכם. כבר למעלה משבעים שנה אנו עושים כמיטב יכולתנו להביא לכם מוצרים איכותיים מהחברות המובילות בעולם, ולהעניק לכם שירות מלא מכל הבחינות - מוצר איכותי, במחיר תחרותי וידע לסייע לכם לבצע את הבחירה הנכונה עבורכם.

הקטלוג הזה מובא בגרסה מודפסת וזמין גם דיגיטלית. קישורים למידע נוסף וסרטונים עם הסברים נוספים או הדגמות שימוש מובאים לאורך כל הקטלוג למוצרים השונים. היכן שמופיע קוד QR לסריקה ניתן בגרסה הדיגיטלית ללחוץ עם העכבר (או האצבע בנייד) ולעבור מייד לקישור. גם תוכן העניינים בעמוד הסמוך מכיל קישורים לעמודים ומאפשר לכם לעבור ישירות לנושא המעניינים אתכם.

אנו עומדים לרשותכם בשעות הפעילות בטלפון, בפקס בווטסאפ או במייל. הסוכנים שלנו עומדים לרשותכם בטלפונים הניידים, ותוכלו למצוא בכל עת מידע רב גם באתר האינטרנט שלנו. האתר מתעדכן כל הזמן, שווה לבקר.


אתם מוזמנים להרשם לניוזלטר שלנו לקבל ישירות לתיבת המייל שלכם הזמנות לקורסים ווובינרים, מבצעים מיוחדים ומידע על מוצרים חדשים.


### **הפנייה בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לכולן וכולם כאחד!**

שלכם,


משפחת פוס וכל הצוות


- המחירים בחוברת כולה אינם כוללים מע"מ ותקפים עד 30/09/24 או עד גמר המלאי
- משלוח חינם בהזמנה בסכום גבוה מ 500 ש"ח
- אין כפל מבצעים/מתנות אלא אם מצוין אחרת
- מחירים אחרי הנחה או שקלול בונוס, מעוגלים לשקל הקרוב
- במבצעי בונוס (2+1 וכד') הבונוס יהיה המוצר הזול מביניהם. המחיר המשוקלל המוצג מחושב עבור קניית מוצרים במחיר זהה.
- במבצעי השני ב 50%, במידה והמחיר אינו זהה, ההנחה תהיה על המוצר הזול מבין השניים. המחיר המשוקלל המוצג, מחושב עבור מוצר אחד בקניית שני מוצרים במחיר זהה.
- תמונות להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין התמונות למוצר בפועל
- דנטאוריינט פוס רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת. ט.ל.ח.

הגדוד העברי 28, ת.ד. 2232 תל אביב 

03-6393640 

דנטאוריינט פוס 

Dentorient\_fuss 

052-4435553 



4-5	(Minimally Invasive Dentistry (MID
6-12	קומפוזיטים
13	כלי יד
14-15	גלס ינומר
16	שיקום / משמרת
17-24	קישור ואדהזיה
25	פוליש והיגינה
26-27	שחזורים זמניים
28-39	אנדודנטיה
40	NTI
41-43	הלבנת שיניים
44-47	טיפול ברגישות
48-49	חיטוי וניקוי
50-53	מטבעים / רטרקציה
54-55	יתדות וחומרי ליבה
56	חומרי מצע
57	פריודונטיה
58	שעוות
59	אקרילים
60	אורתודונטיה
61	קומפוזיט מעבדתי / זמני וקבוע
62-63	תותבות
64-67	CAD
68	all ceramic
69	חרסינה PFM
70-71	חרסינה ל all ceramic

## Brix3000

### ג'ל טבעי המפרק דנטין נגוע בעששת, ללא כאב



010117 • Brix3000 3g

### Brix3000 הוא מוצר דנטלי חדשני להסרת דנטין נגוע בעששת בצורה א-טראומטית וללא כאב.

ל Brix3000 פעילות אנזימטית של הפפאין - אנזים טבעי המופק מפרי הפאפאיה (3,000 U/mg, ביו-אנקפסולציה), שממסה תוך 2 דקות רקמה דנטלית נגועה בעששת. לאיזורים קלים לגישה אין צורך בקדיחה כלל - משתמשים באקספלורר ומראה בלבד להנחת החומר ולהסרת הדנטין הנגוע.

Brix3000 מגיב רק עם דנטין נגוע בעששת. לא קיימת פרוצדורה או חומר המשמרים כל כך הרבה רקמה בריאה כמו ה Brix3000.

דבר זה מבטיח את הטיפול העדין ביותר ושיניים בריאות לאורך זמן, תוך שימוש במינימום חומר שחזור. ביטול הצורך בטיפול אגרסיבי הכולל קידוח ואלחוש מקומי, מפחית את הפחד הקיים אצל מטופלים רבים, וגם משפר את הליך הטיפול.

הסרת רקבון שן בעזרת Brix3000 מהירה יותר ובטוחה יותר מהטיפולים הקיימים - ניתן לטפל בכמה מוקדים במקביל, ובכך להפחית את זמן הטיפול ואת חרדת המטופל.

הפורמולה הפטנטית של Brix3000 משתמשת באנזים פפאין אשר נוסה קלינית על מגוון רחב של מטופלים. הוא 100% לא-רעיל וללא תופעות לוואי. הוא הוכח כבטוח במגע עם העור, עיניים, חלקי גוף אחרים ואף בבליעה, וניתן להשתמש בו בילדים צעירים ונשים הרות.

עבודה עם Brix3000 היא בהתאם לטכניקת ART (Atraumatic Restorative Treatment), ארגון הבריאות העולמי (WHO), והפדרציה הדנטלית העולמית (IDF).

טיפול דנטלי ללא כאב וללא פחד מעלה את ההיענות ומשפר את הבריאות.



מוצר חדשני

פעול אנזימטית

פועל רק על דנטין נגוע

לא צורך בקדיחה או אלחוש

טבעי ו 100% לא רעיל

לא כאב ולא פחד

לטיפול דנטלי מיטבי



## שלבי העבודה עם Brix3000:

**1.** הכן ובודד את איזור הטיפול לפרוצדורה רגילה, ואם יש צורך, הגדל את קוטר החלל עם כלי ידני או ממונע כדי לקבל חלל נגיש. במקרים של נגעים גדולים, ניתן להניח Brix3000 ישירות.

**2.** הנח Brix3000 עם כפית קהה והשאר את החומר לפעול במשך **2-3 דקות**. יש למנוע חדירת מים לחלל כדי לא לדלל את הג'ל ולהאריך את התהליך.

**3.** הסר את החומר עם כפית קהה בתנועת מטוטלת וללא הפעלת לחץ. אם יש צורך, ניתן לחזור על התהליך לקבלת דנטין בריא. וודא נוכחות של דנטין בריא בעזרת אקספלורר I caries detector.

**4.** הנח את חומר המילוי המתאים כרגיל. ניתן להניח Brix3000 בו-זמנית על מספר שיניים לחסוך בזמן. אם בפעם השנייה או השלישית שמתחילים את החומר, הצבע של הג'ל המוסר זהה לצבע הג'ל ההתחלתי, זו אינדיקציה שאין יותר נוכחות של דנטין נגוע.



אנזים הפפאין, הרכיב העיקרי של Brix3000, עובר ביו-אנקפסולציה בטכנולוגיה חדשנית וייחודית - E.B.E (Encapsulating Buffer Emulsion), הנועלת את הג'ל ומייצבת אותו, ומגדילה את הפעילות האנזימטית של המוצר באופן אקספוננציאלי.



הטכנולוגיה מייצרת PH אופטימלי לג'ל לשתק את האנזים ולשחרר אותו בעת פרוטאוליזה של קולגן ולהגביר את פעילותו ב 50% עד 60%.


לכן למוצר יעילות גבוהה בבפירוק רקמה נקרוטית והסרת סיבי קולגן רקמה הנוגעה בעששת. למוצר חסיסות נמוכה בנוזלי הפה ועמידות גבוהה ולכן אינו דורש אחסנה בקירור.



מוצר טבעי המופק מפרי הפפאיה

בנוסף, Brix3000 הוא ג'ל שאינו מזיק, אינו רעיל ואינו גורם לתגובה במגע עם רקמה בריאה: לשון, חניכיים, דנטין בריא, עור ואפילו בבליעה.

Brix3000 לא גורם לגירוי או רגישות בשל הפעילות הסלקטיבית של הג'ל, הפועל אך ורק על רקמה נקרוטית ומאבד את פעילות האנזימטית במגע עם רקמה בריאה.

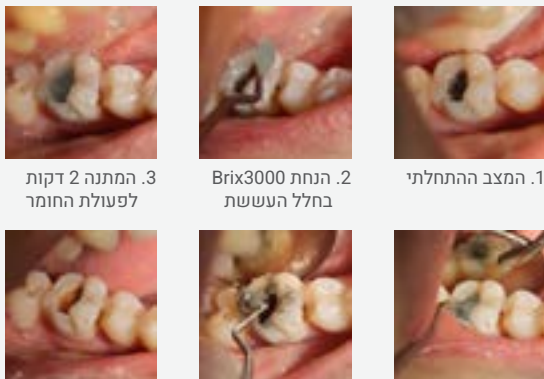

1. המצב ההתחלתי  
2. הנחת Brix3000 בחלל העששת  
3. המתנה 2 דקות לפעולת החומר  
4. הסרת חומר השן הננוע בעששת בעזרת כלי יד  
5. חלל העששת נקי ומוכן לקבלת השחזור

אקסקוורטור של Premier ב 121 74 ש"ח לרוכשים 2 יח' Brix3000



**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 224	₪ 299	Brix3000 3g



**STELA**  
קומפוזיט BULK נוזלי, בהקשייה עצמית לשחזורים עמוקים




קומפוזיט נוזלי, בהקשייה עצמית, לשחזורים עמוקים. התחליף המושלם לשחזורי אמלגם.

• חוזק קישור גבוה לדנטין


• ללא מרווחים - הפולימריזציה מתחילה מהשוליים (היכן שמונח הפריימר) לא ממנורת ההקשייה. כלומר תהליך הפולימריזציה מושך את השחזור לתוך החלל ולא החוצה ממנו.



Stela bonding interface (self etch)

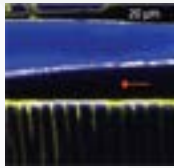


Filtek One Bulk Fill (self etch)

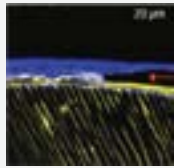

Filtek One Bulk Fill (Etch & rinse)

• Stela חזק יותר מקומפוזיט - חוזק של שחזור נמדד לפי שילוב תכונותיו בדחיסה ומתיחה, התנגדות לכוחות אוקולוזליים ובמניעת שברים בזמן הפעולה. ל Stela איזון מושלם בין הכוחות הללו, עם ביצועים טובים יותר מרוב שאר הקומפוזיטים.

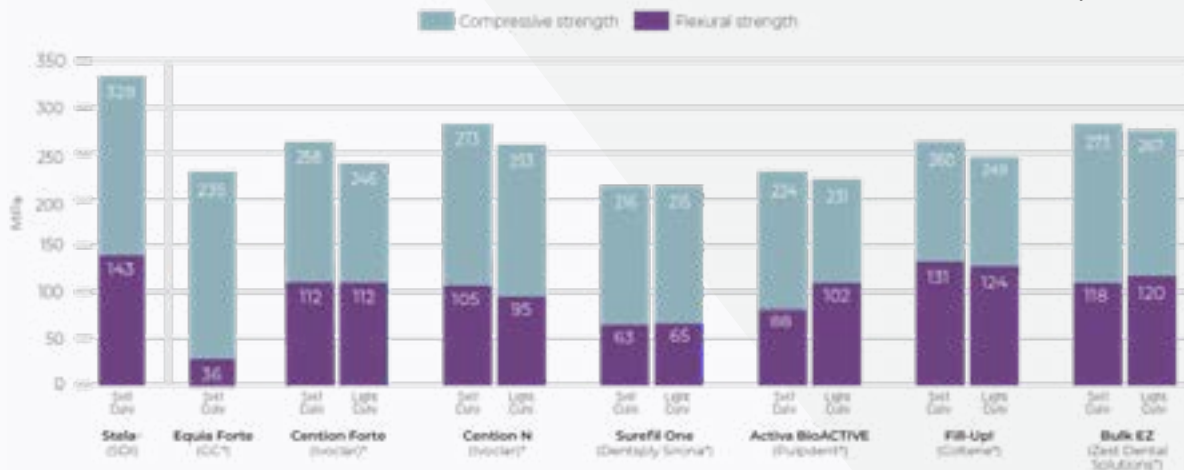

• שחזורים מהירים ופשוטים יותר - שחזורים עמוקים BULK ללא הגבלת עומק. שחזורי קומפוזיט נכשלים מסיבות שונות, ביניהן חומר שלא עבר הקשייה באיזורים עמוקים, דבר העלול לגרום גם לרגישות. Stela עוברת הקשייה מלאה בכל עומק.



- פחות שלבי עבודה, פחות זמן, פחות רגישות טכניקה- לשיטת Stela Primer שני שלבים בלבד והיא אורכת 15 שניות, לעומת עד 7 שלבים ו 90-120 שניות בשיטות אחרות של אצ'ינג, פריימר ובונד.



- הקשייה כימית מהירה ב 50% - ל Stela זמן התקשות כימית מהיר יותר משני חומרי השחזור מובילים אחרים. לקפסולה ומזרק האוטומיקס של Stela זמן עבודה נוח של דקה ו 30 שניות. השחזורים מוכנים לפיניש ופוליש 4 דקות מזמן תחילת הערבוב. עובדה זו חוסכת 50% מהזמן ומעלה את יעילות הטיפול, במיוחד כאשר משחזרים מספר חללים ברצף.

## INDICATIONS



## זמין כמזרק אוטומיקס או קפסולה:

- ערכת הכרות אוטומיקס:**
- פריימר Stela בקבוק 5 מ"ל
  - מזרק אוטומיקס Stela, 8 גרם
  - 15 טיפים לערבוב
  - 15 מיקרו-אפליקטורים



8640002 • Stela Automix Intro Kit

- ערכת הכרות קפסולות:**
- פריימר Stela בקבוק 5 מ"ל
  - 10 קפסולות Stela תואם לאקדח גלס ינומר
  - 15 מיקרו-אפליקטורים



8640004 • Stela Capsules Intro Kit

## שני ב 50%

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
518 ₪	690 ₪	ערכת הכרות - מזרק אוטומיקס 8 ג'
374 ₪	489 ₪	ערכת הכרות - 10 קפסולות



למידע נוסף באתר היצרן:

**IVENEER**

**תבניות ליצירת שחזורים ישירים במרפאה, בעזרת קומפוזיט נוזלי או משחתי**



**IVENEER**  
INJECTABLE MATRIX SYSTEM

848000 • IVENEER full kit 128 pcs

**אינדיקציות:**

- ציפויי קומפוזיט ישירים (direct)
- מיפויי קומפוזיט בלתי ישירים (semi direct)
- הכנת mock-up מהיר לפני טיפול
- שחזורים זמניים לפני קבלת וינירים מחרסינה
- כל השחזורים מקלאס III, IV, V
- שיניים לא ישרות שאינן מצריכות טיפול אורתודונטי
- pegs laterals
- כתרים מקומפוזיט
- שיניים שחוקות / מושחזות
- שיניים עם שינויי צבע



IVENEER היא תבנית מוכנה מראש ליצירת שחזורי שיניים ישירים במרפאה באמצעות קומפוזיט נוזלי או משחתי, וללא תלות במעבדה.

העיצוב האנטומי המלא הייחודי של התבנית מאפשר לרופאי השיניים לייצר שחזורים קדמיים אסתטיים תוך דקות.



**INSERT**



**INJECT**



**DONE**

**קנו ערכת IVENEER וקבלו  
Luna Flow קומפוזיט נוזלי Luna Flow  
במתנה!**

מחיר	תיאור המוצר
1,987 ₪	ערכת IVENEER מלאה - 128 יח' 8 מטריצות גדולות X 8 יח' 8 מטריצות קטנות X 8 יח'

מידע נוסף והוראות שימוש מפורטות  
(קורס אונליין מלא ללא עלות)  
באתר היצרן

[www.iveneer.com](http://www.iveneer.com)



## Luna Flow קומפוזיט נוזלי

### Luna Flow הוא קומפוזיט נוזלי חדש, חזק במיוחד.

תערובת פילרים במימדים זעירים במיוחד, לאופימיזציה של ההנדלינג, ושל התכונות מכניות ואופטיות.

ל Luna Flow רדיואופקיות גבוהה, שליטה על האפליקציה, התאמת גוונים פשוטה ומדויקת עם יציבות הגוון לאורך זמן, חוזק מצויין ועמידות בפני שחיקה.

תכונות אלה הופכות את Luna Flow בחירה מצויינת ל:

- לליינר
- בסיס
- שחזורים זמניים
- תיקון שחזורים
- שחזורים Class V
- ואינדיקציות נוספות




PERFECT FLOW  
PERFECT STAY

**מזרק  
2 ג'**

**SDI**

8566101 • Luna Flow A1 2g  
8566102 • Luna Flow A2 2g  
8566103 • Luna Flow A3 2g  
8566115 • Luna Flow OA2 2g  
8566121 • Luna Flow XB (eq. OM2 Vita®) 2g  
8566122 • Luna Flow 2XB (eq. OM1 Vita®) 2g

שקיפות משתנה עם עובי השחזור

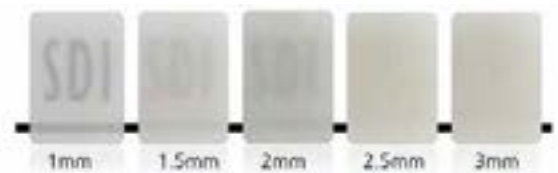

Luna Flow A2

### וינירים על שיניים קדמיות, בעזרת מערכת Luna Flow A1 ו VENEER



לפני



אחרי

מקרה באדיבות: ד"ר איתי מישאלוף

## מבצע 3+1

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
104 ₪	139 ₪	Luna Flow מזרק 2 ג'

## Luna 2 קומפוזיט אוניברסלי

### חוזק ואסתטיקה מעולים

Luna 2 הינו קומפוזיט אוניברסלי מדור חדש.

ל Luna 2 הרכב ייחודי משופר של פילרים שפותח ע"י החוקרים ב SDI, להעניק לך מוצר עם הנדלינג משופר, רדיואופקיות גבוהה ותכונות מכניות אמינות.

**Luna 2 אינו מכיל: BPA, Hema, Bis-GMA, Bis-EMA**

Luna 2 הופך את העבודה עם קומפוזיט לקלה יותר מאי פעם!



SUPERIOR  
STRENGTH &  
AESTHETICS

8452001 • Luna 2 A1 4g  
8452002 • Luna 2 A2 4g  
8452003 • Luna 2 A3 4g  
8452015 • Luna 2 OA2 4g

SDI



8452025 • Luna 2 Intro Kit

SDI

## מבצע 1+1


קנו 5+5 מזרקי קומפוזיט Luna 2  
וקבלו כלי יד לקומפוזיט Slix DE 11  
בשווי 261 ₪  
**במתנה!**



מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
115 ₪	230 ₪	Luna 2 מזרק 4 ג'



Images courtesy of Prof Dr Giovanna Neri – Brazil

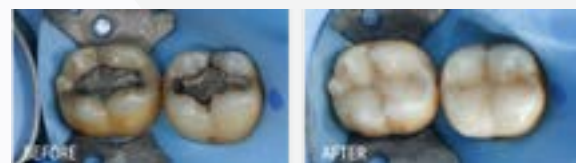

Images courtesy of Prof Dr Michael Chan – Australia

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
372 ₪	60%	931 ₪	5 ט קומפוזיטים Luna II

**Harvard Multichrome**  
קומפוזיט אוניברסלי בעל אפקט זיקית



Shade adaptive composite



7100001• Harvard Multichrome 3g syr



**הרוורד מולטיכרום** הוא קומפוזיט בעל אפקט זיקית המתאים את עצמו כמעט לכל גווני השן. בעזרת טכנולוגיית הייפר-ננו ייחודית, האור נשבר ומוחזר כך שהוא משקף את צבע השן המשוחזרת באופן טבעי.

- ✓ למשתמשים הרוצים קומפוזיט אחד בלבד
- ✓ קומפוזיט מותאם גוון לכמעט כל גווני השן
- ✓ מעבר בלתי נראה בין אמיל, דנטין וקומפוזיט, היוצר שוליים שפשוט נעלמים.
- ✓ טכנולוגיית הייפר-ננו, פילרים ספריים.
- ✓ ללא פגמנטי צבע
- ✓ אפקט זיקית אופטי (אור)
- ✓ תכונות הנדלינג מצויינות
- ✓ התכווצות נמוכה
- ✓ ברק גבוה וקבוע לאחר פוליש
- ✓ תכונות פיזיקליות מצויינות
- ✓ רדיואופקי
- ✓ אופלצנטי

**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
281 ₪	375 ₪	מזרק קומפוזיט 3 ג'
281 ₪	375 ₪	Block 'n mask 3 ג'

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
864 ₪	31%	1,252 ₪	סט Multichrome + 3 מזרקי קומפוזיט + מזרק Block 'n mask 3 ג'

**מזרק Block 'n mask**  
מתקן התאמת גוון במקרים קשים וממסך דיסקולורציות חזקות

7100005• Harvard Block 'n Mask 3g syr

**סט Multichrome**  
ערכה המכילה 3 מזרקי קומפוזיט 3 ג' ומזרק Block 'n mask 3 ג'

7100009• Harvard Multichrome Kit

**kuraray**



- #3181-EU • Majesty ES-2 Universal
- #3184-EU • Majesty ES-2 Universal Dark
- #3183-EU • Majesty ES-2 Universal Light
- #3182-EU • Majesty ES-2 Universal White



**CLINICAL CASE ANTERIOR**



Before



After

photos by Dr Luca Dusì

**Clearfil Majesty ES-2 Universal קומפוזיט אוניברסלי**

קומפוזיט אוניברסלי בעל טכנולוגיית פיזור אור ( - light diffusion technology LDT) המאפשרת לבצע שחזורים בשיניים קדמיות ואחוריות בעזרת 4 גוונים בלבד

ליין הקומפוזיט Clearfil Majesty ES-2 Universal מורכב ממטע גוונים:

- Universal (U)** לכל השחזורים האחוריים
- Universal Light (UL)** לשחזורים קדמיים בהירים
- Universal Dark (UD)** לשחזורים קדמיים כהים
- Universal White (UW)** לשחזורים קדמיים בהירים מאוד עם value גבוה

הקונספט עובד הודות לטכנולוגיית פיזור אור LDT המאפשרת לשחזורים לפזר ולשקף קרני אור באופן דומה לשן טבעית. כתוצאה מכך החומר מתמזג עם מבנה השן בצורה רציפה.



שחזור אחורי



YouTube



שחזור קדמי

SHADE CATEGORY	CAVITY CLASS	SHADE				
		A1 B1, B2	A2 D2, C1	A3 C2, D3	A3.5 B3, B4	A4 C3, C4
Universal	I	<div style="text-align: center;"> <p>מזרק אחד לכל שחזורי Class II ו Class I</p> </div>				
	II					
	III	<div style="text-align: center;"> <p>Universal Light</p> <p>מזרק אחד לכל שחזורי Class III-V בגוונים בהירים</p> </div>		<div style="text-align: center;"> <p>Universal Dark</p> <p>מזרק אחד לכל שחזורי Class III-V בגוונים כהים</p> </div>		
	IV					
	V					

For clinical cases in the anterior region that require high lightness/value, we offer a dedicated white shade (UW).

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 325	15%	₪ 382	Clearfil Majesty ES-2 Universal

בונד אוניברסלי  
Clearfil Universal Bond Quick trial kit

**במתנה\***  
לרוכשים 2 מזרקי קומפוזיט Majesty ES-2  
עד גמר המלאי\*

MADE IN JAPAN

**Premier Air**  
כלי יד חדשים, קלים וארגונומיים



**SLIX**  
כלי יד מיוחדים לקומפוזיט



1004697 • PremierAir H204 SD



05701 • Slx DE 13



1003602 • PremierAir Probex UNC 15 CV



05702 • Slx IPC




1004652 • PremierAir Columbia 13/14



05706 • Slx Mini 11



1004666 • PremierAir Gracey 13/14

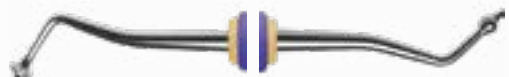

05707 • Slx 21B Acorn-Duckhead



1004665 • PremierAir Gracey 11/12



05709 • Slx Mini W3

**שניב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
ש 146	ש 194	כלי יד Premier Air

**שניב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
ש 196	ש 261	כלי יד לקומפוזיט SLIX

**Riva Self Cure HV**  
גלס ינומר לשחזורים, צמיגות גבוהה

**Riva Self Cure**  
גלס ינומר לשחזורים



8630002 • Riva Self Cure HV A2 fast 50 CAP  
8630003 • Riva Self Cure HV A3 fast 50 CAP

8605002 • Riva Self Cure A2 fast 50 CAP  
8605003 • Riva Self Cure A3 fast 50 CAP

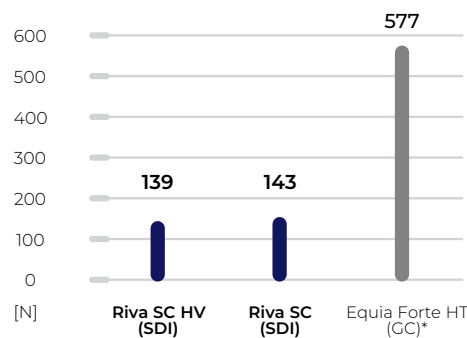


Photo courtesy of Dr Marcelo Alves & Dr Alvaro Junqueira – Brazil

**הוצאת חומר קלה יותר**

האקסטרוזיה של Riva SC קלה יותר ב 70% מאלה של מוצרים אחרים. דבר זה מפחית את רעידות כף היד והסטרס על השרירים, ומעניק לך יותר יציבות ושליטה בזמן הנחת השחזורים.

**AVERAGE EXTRUSION FORCE**



†Source: Internal test data Nov 2020  
\*Not a registered trademark of SDI.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 486	20%	₪ 608	גלס ינומר Riva SC

חומר שחזור אידיאלי לשחזורים בפולשנות מינימלית (MID), כחומר ביו-אקטיבי המונע עששת. מבנה השן הטבעי נשמר, כך שאין צורך בהכנת חללים גדולים ואנדרקאטים. Riva Self Cure מכיל פילר ionglass - פטנט של חברת SDI. ה ionglass הינו רדיואופקי, בעל שחרור גבוה של יונים, ביואקטיבי ונמצא בשימוש במגוון מוצרי הגלס ינומר של SDI.

Riva Self Cure משחרר פלואוריד במינון גבוה לסייע ברה-מינרליזציה של המשקן הטבעי.

**אינדיקציות:**

- ✓ שחזורים Class I
- ✓ שחזורים Class II
- ✓ שחזורים Class V
- ✓ בניית ליבות
- ✓ שחזורים בשיניים נשירות
- ✓ שחזורים גריאטריים
- ✓ שחזורים זמניים
- ✓ שחזורים בטכניקת ART
- ✓ החלפת דנטין
- ✓ שחזורים בטכניקת הסנדביץ'
- ✓ Molar Incisal Hypomineralisation (גישת ביניים)
- ✓ שחזורים בטכניקת SMART (עם SDF כמו Riva Star)
- ✓ Minimally Invasive Dentistry

**יתרונות:**

- ✓ שחרור פלואוריד גבוה ויכולת הטענה מחדש
- ✓ **אין התכווצות**
- ✓ התאמה מצויינת לשוליים
- ✓ החלפת דנטין חזקה
- ✓ ללא BPA וללא HEMA
- ✓ הצמדות כימית למבנה השן
- ✓ עמידות גבוהה בפני חומצה
- ✓ מעולה לשחזורים בפולשנות מינימלית (MID)
- ✓ טכנולוגייה ביו-אקטיבית ionglass™ - חילוף יונים גבוה
- ✓ **HV** - אופציה לצמיגות גבוהה!
- ✓ **זמן הקשייה כימית - עד 5 דקות**

**Riva Light Cure HV**  
גלס יונמר אסתטי, מוקשה אור  
לשחזורים, צמיגות גבוהה


**Riva Light Cure**  
גלס יונמר אסתטי, מוקשה אור  
לשחזורים




**SDI** 8730002 • Riva Light Cure HV A2 50 CAP    8700002 • Riva Light Cure A2 50 CAP  
8730003 • Riva Light Cure HV A3 50 CAP    8700003 • Riva Light Cure A3 50 CAP



Photos courtesy of Dr Geoff Knight – Australia

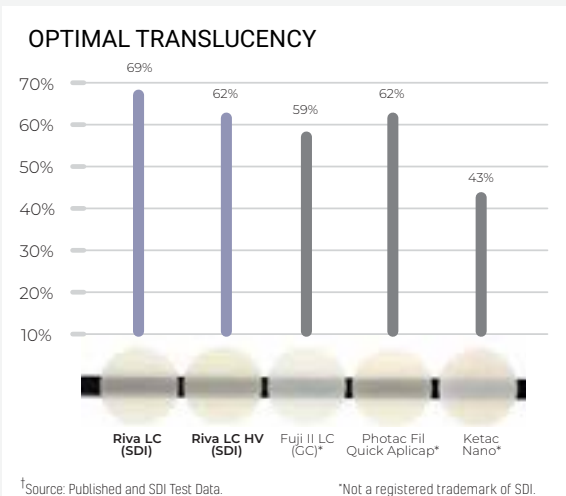

Riva Light Cure HV	Riva Light Cure	אינדקסיות
✓	✓	שחזורים ללא מתח Class I, II
✓	✓	שחזורים Class III
✓	✓	שחזורים סרויקליים (Class V): - ארוזיות סרויקליות - אבפרקציות - שחזורים שורשיים
✓	✓	שחזורים בשיניים נשירות
✓	✓	שחזורים גריאטריים
✓	✓	בניית ליבות
	✓	איטום חריצים וחרירים
✓	✓	סתימות זמניות
	✓	מצע
✓	✓	בסיס / החלפת דנטין
✓	✓	שחזור יחד עם קומפוזיט (טכניקת הסנדביץ')

**הנדלינג יוצא דופן:**



Source: Internal test data Nov 2020  
\*Not a registered trademark of SDI.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 472	20%	₪ 590	גלס יונמר Riva LC

**Spot-On**  
ג'ל פוספורי לצריבה רגילה או  
סלקטיבית



**Comfort View**  
פוחת פה נוח במיוחד



**צריבה סלקטיבית של אמיל במקרים של:**

- שימוש בדבקים בעלי יכולת צריבה עצמית (Self Etching)
- צריבת דנטין, הפחתת הסיכון לצריבת יתר ורגישות יתר
- תיקוני קומפוזיט או חרסינה
- צמנטציה של ברקטים אורתודונטים
- ✓ אידיאלי לצריבה רוטינית
- ✓ פרוצדורות של צריבה סלקטיבית
- ✓ צבע כחול המעניק קונטרסט חזק לאמיל ודנטין
- ✓ שימוש קל ונוח
- ✓ נשטף ללא שאריות

- ✓ מרחיק שפתיים ולחיים לגישה בוקלית וגינג'בילית אופטימלית
- ✓ מקסימום ראות לרופא/ה ונוחות למטופל
- ✓ אידיאלי לפרוצדורות קצרות וארוכות
- ✓ עיצוב אנטומי עם תמיכה מרופדת לשפתיים, המרחיק את השפתיים מהשיניים הקדמיות והחניכיים
- ✓ מתאים לשימוש בדיאגנוסטיקה, מניעה, דיקום, סריקה דיגיטלית, הבהרת שיניים במרפאה וצילום אינטרא-אוראלי
- ✓ ניתן לעיקור באוטוקלב
- ✓ ללא לטקס



מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
106 ₪	20%	132 ₪	אצינג סלקטיבי Spot-On, 5 מזרקים של 1.2 מ"ל

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
196 ₪	15%	231 ₪	פוחת פה ComfortView 2 יח' באריזה



## Zip Bond חומר קישור אוניברסלי



- ✓ אוניברסלי - מתאים לכל טכניקות הצריבה (אצ'ינג)
- ✓ משחרר פלואוריד
- ✓ חוזק קישור עקבי על דנטין ואמייל, בטכניקות צריבה שונות
- ✓ ללא BPA וללא HEMA

### אינדיקציות:

#### שחזורים ישירים:

- שחזורי קומפוזיט מוקשי אור
- קומפומרים מוקשי אור
- איטום חלל גישה לפני הנחת שחזורים לא ישירים
- תיקון חרסינה ושחזורים קרמיים היברידיים ע"י קומפוזיט
- איטום משטחי שורש חשופים הגורמים לרגישות
- בניית ליבה בעזרת קומפוזיטים מוקשי אור/ בעלי הקשייה כפולה
- ורניש מגן על שחזורי גלס יונומר

#### שחזורים לא ישירים:

- צמנטציה של שחזורים לא ישירים

## Stae Bond חומר קישור דור 5



Stae הוא חומר קישור חד-קומפוננטי, משחרר פלואוריד, הנקשר לאמייל ודנטין בשיטת total etching ומיועד להדבקה ישירה. Stae חוזר בשלמות ובאופן הומוגני לשכבה ההיברידית להבטיח הדבקה מעולה לשן.

### להדבקת כל סוגי השחזורים הישירים במרפאת השיניים

#### יתרונות:

- ✓ חוזק קישור גבוה
- ✓ משחרר פלואוריד
- ✓ ללא BPA וללא Bis-GMA
- ✓ קל לשימוש - נקשר למשטחי שן לחים ויבשים
- ✓ היברידיזציה מלאה ואחידה
- ✓ שמירה על מבנה הקולגן

#### חוזק קישור גבוה

ההיברידיזציה המושלמת של שרף ה Stae לתוך הדנטין שעבר דהמינרליזציה מביאה לחוזק קישור גבוה.

## מבצע 1+1

מחיר בקניית 1+1	מחיר	תיאור המוצר
₪ 209	₪ 418	Zip Bond 5 ml

## מבצע 1+1

מחיר בקניית 1+1	מחיר	תיאור המוצר
₪ 127	₪ 254	Stae Bond 5 ml



## Clearfil SE Bond חומר קישור דור 6 בעל יכולת צריבה עצמית

### אינדיקציות:

- ✓ שחזורים ישירים עם קומפוזיטים מוקשי אור
- ✓ איטום חלל הכנה כטיפול הכנה לשחזורים לא ישירים
- ✓ טיפול ברגישות יתר ו/או בשורשים חשופים
- ✓ תיקון אינטרא-אורלי של כתרים או גשרים שבורים
- ✓ מחרסינה או קומפוזיט עם קומפוזיט מוקשה אור
- ✓ טיפול בפני שטח של שחזורים מחרסינה, חרסינה היברידית, קומפוזיט רזין מוקשה

חומר קישור מוקשה אור, המכיל פריימר בעל יכולת צריבה עצמית (self-etching) ובונד. הפריימר על בסיס מים מאפשר טיפול באמייל ובדנטין בשלב אחד.

### המונר MDP מסייע לביטול תופעות של רגישות פוסט אופרטיבית


### יתרונות:

- איטום שולי מצויין לאורך זמן
- יציבות ועמידות ארוכי טווח
- **ללא רגישות פוסט אופרטיבית**
- חוזק קישור מעולה הודות לקישור הכימי של מונר MDP לשאריות ההידרוקסי אפטיט סביב רשת הסיבים
- **רגישות תהליך נמוכה:**
  - טולרנס גבוה לטעויות
  - תוצאות טובות באופן עקבי
  - ללא שלב שטיפה - תהליך ללא הרטבת יתר או ייבוש יתר של קולגן חשוף

תיאור המוצר	מחיר	הנחה	מחיר סופי
Clearfil SE Bond	1,169 ₪	21%	924 ₪

#4212-EU • Automix Universal A2      #4202-EU • Handmix Universal A2  
#4214-EU • Automix Translucent

## Panavia SA Cement Universal רזין צמנט אוניברסלי Self Adhesive המתקשה כימית או באור, ללא צורך בפריימרים

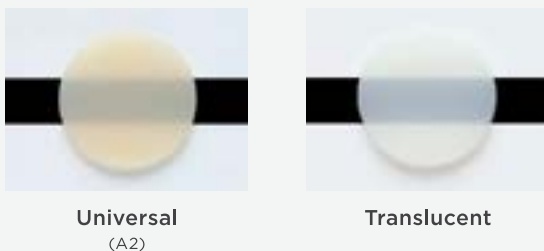

פנביה SA צמנט אוניברסלי הוא הצמנט בעל האדהזיה העצמית המוביל בזכות המונומר הייחודי LCSi, הנקשר לכמעט כל חומר כולל חרסניה זכוכיתית, ללא צורך בפריימרים נפרדים. מונומר LCSi יוצר קשר כימי חזק ועמיד לחרסניה וליתיום דיסיליקט (אימקס) וקומפוזיט רזין. מונומר MDP המקורי הנמצא גם כן בצמנט יוצר קשר חזק לזירקוניה, דנטין ואמייל.

### פנביה SA צמנט מתאים לצמנטציה של:

- חרסניה זכוכיתית
- חרסניה
- ליתיום דיסיליקט (אימקס)
- קומפוזיט רזין
- זירקוניה

### מגוון רחב של אינדיקציות:

- כתרים, גשרים
- אינליי, אונליי
- פוסטים
- גשרים אדהזיביים

הודות להדבקה החד-שלבית, הצמנטציה קלה יותר מאי פעם.

הצמנט קיים בערבוב ידני ובמזרק אוטומיקס



עד 60 צמנטציות בערבוב ידני  
לעומת כ- 20 במזרק אוטומיקס

מונומר MDP המקורי יוצר קישור כימי חזק למתכת, זירקוניה אמיל ודנטין.

מונומר LCSi המקורי יוצר קישור כימי חזק לחרסניה, ליתיום דיסיליקט וקומפוזיט רזין.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
534 ₪	19%	659 ₪	מזרק ערבוב ידני A2
557 ₪	30%	796 ₪	מזרק אוטומיקס



**Panavia V5**

צמנט אחד לכל האינדיקציות. מתקשה כימית או באור



ערכת 5 גוונים

#3600-EU • Panavia V5 Professional Kit 5 syr.  
Universal A2, Clear, Brown A4, White, Opaque

- 5x Cement Syringe 2.4ml
- 5x Try-in Paste 1.8ml
- 1x Tooth Primer 2.0ml
- 1x Clearfil Ceramic PRIMER PLUS 2.0ml
- 1x K-ETCHANT Syringe 3.0ml
- 30x pcs Mixing tip
- 10x pcs Endo tip
- 50x pcs Applicator brushes (fine)
- 1x Mixing dish
- 20x pcs Needle tip



ערכת גוון אחד

#3604-EU • Universal A2  
#3605-EU • Clear

- 1x Syringe 2.4ml (Universal A2 / Clear)
- 1x Tooth Primer 2.0ml
- 1x Clearfil Ceramic PRIMER PLUS 2.0ml
- 10x pcs Mixing tip
- 50x pcs Applicator brushed (fine)
- 1x Mixing dish

**עם Panavia V5 הדבקת שחזורים הופכת להיות פשוטה וקלה:**

- ✓ פריימר אחד בלבד לכל סוגי השחזורים
- ✓ פריימר אחד לשן
- ✓ צמנט אחד לכל סוגי השחזורים

**אינדיקציות**

- צמנטציה של כתר, גשרים, אינליי ואונליי
- צמנטציה של וינירים
- צמנטציה של Adhesion bridges וספלינטיים
- צמנטציה של שחזורים פרוטטים על מבני שתלים
- צמנטציה של שחזורים לבסיסי טיטניום (Ti Base)
- צמנטציה של יתדות וליבות (Posts and cores)

**מזרק רפיל**



**Cements refill (8.1g):**

- #3611-EU • Universal A2
- #3612-EU • Clear
- #3613-EU • Brown A4
- #3614-EU • white
- #3615-EU • Opaque

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
2,329 ₪	28%	3,235 ₪	פנביה V5 ערכת 5 גוונים
827 ₪	16%	1,038 ₪	פנביה V5 ערכת גוון אחד
817 ₪	15%	961 ₪	פנביה v5 מזרק רפיל 8.1 ג'



**Panavia Veneer LC**  
צמנט מוקשה באור להדבקת וינירים



#4500-EU • Panavia Veneer STD Kit (universal A2).  
#4501-EU • Panavia Veneer STD Kit (Clear).


**מזרק רפיל לצמנט:**

- #4505-EU • Universal A2
- #4506-EU • Clear
- #4507-EU • Brown A4
- #4508-EU • white



מגיע ב 4 גוונים זהים ל Panavia V5 (מלבד אופק). ניתן לבדוק התאמה בעזרת משחות ה Try-in

“PANAVIA™ Veneer LC” Paste

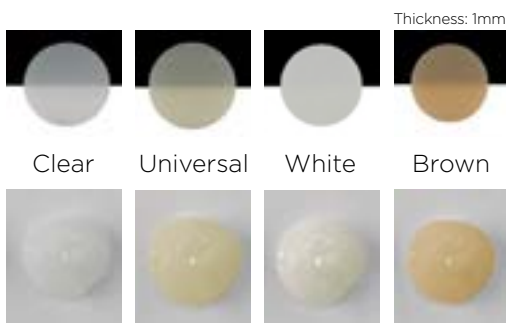

“PANAVIA™ V5” Try-in Paste

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 928	20%	₪ 1,161	פנביה וינר LC ערכת גוון אחד
₪ 311	15%	₪ 366	פנביה וינר LC, מזרק רפיל 2.6 ג'

**אינדקציות**

- צמנטציה של וינירים מחרסינה או קומפוזיט
- צמנטציה של אינליי ואונליי בעובי עד 2 מ"מ

- ✓ חוזק קישור גבוה לאמייל ודנטין
- ✓ עמידות בפני שינוי צבע
- ✓ תהליך צמנטציה פשוט ואחיד
- ✓ זמן עבודה 3 דקות ו 20 שניות
- ✓ צמיגות אופטימלית
- ✓ 4 גוונים להתאמה מושלמת



Photos courtesy of Dr. Sergio Arias



ניצד להדביק למינייט עם Panavia Veneer



**new**

**BPA FREE**


**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA

- SUSTAINED FLUORIDE RELEASE
- LIGHT TACK CURE FOR EASY REMOVAL OF EXCESS CEMENT
- SUPERIOR BOND STRENGTH

**SDI**

8800703 • Riva Cem 4g x2 syr

Cement tip waste comparison

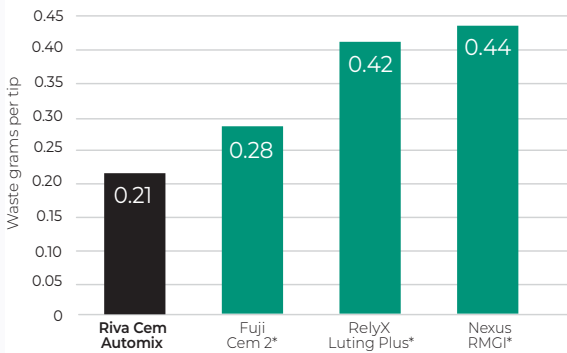

1. Initial presentation.



2. Riva Cem Automix showing ideal consistency after extrusion.



3. Seat the zirconia crown. Excess cement removed easily by light tack cure.




4. Final restoration.

Photos courtesy: Dr Yassine Harichane (FRANCE)

**Riva Cem**  
**צמנט להדבקה על בסיס RMGI**


- ✓ הקשייה עצמית (כימית)
- ✓ רדיואופקי
- ✓ משחרר פלואוריד
- ✓ חוזק קישור גבוה לאמייל ודנטין
- ✓ חוזק פלקסורלי גבוה
- ✓ יציבות צבע לאורך זמן
- ✓ טיפ ערבוב חסכוני

Enamel & dentine - bond strength after 6 months

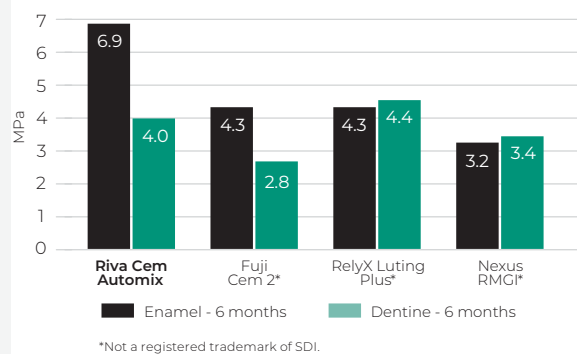


Study: In vitro properties of different resin-modified glass-ionomer cements  
Prof. Dr. Alessandro Loguercio and Alessandra Reis (Brazil)

Flexural Strength (MPa)

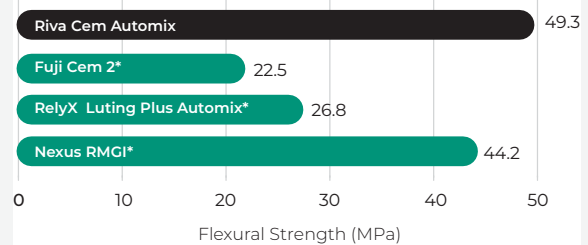

Cement colour change over time

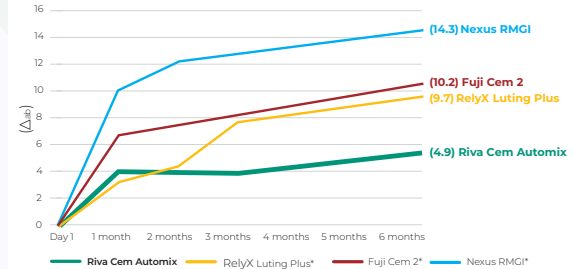

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 298	15%	₪ 350	רדין צמנט Riva Cem 2 מזרקי אוטומיקס ג' (סה"כ 8 ג')

## Harvard Implant Semi-Permanent Cem צמנט חצי קבוע לשתלים




7081400 · Harvard Implant semi-permanent, Syr 5 ml

### צמנט לשתלים חצי קבוע

#### Technical Data

Compressive strength	40 MPa
Film thickness	15 $\mu$ m
Working time (23 °C / 73 °F)	2:00 min
Setting time (self cure) approx.	4:00 min
Light cure, per area	20 sec

- ✓ ללא התכווצות
- ✓ פילם פולימר אלסטי
- ✓ לצמצום כוחות לעיסה על העצם למינימום
- ✓ הקשיה כפולה
- ✓ הדבקה בקלות
- ✓ הסרה בקלות
- ✓ הדבקה מחדש בקלות
- ✓ איטום מצויין


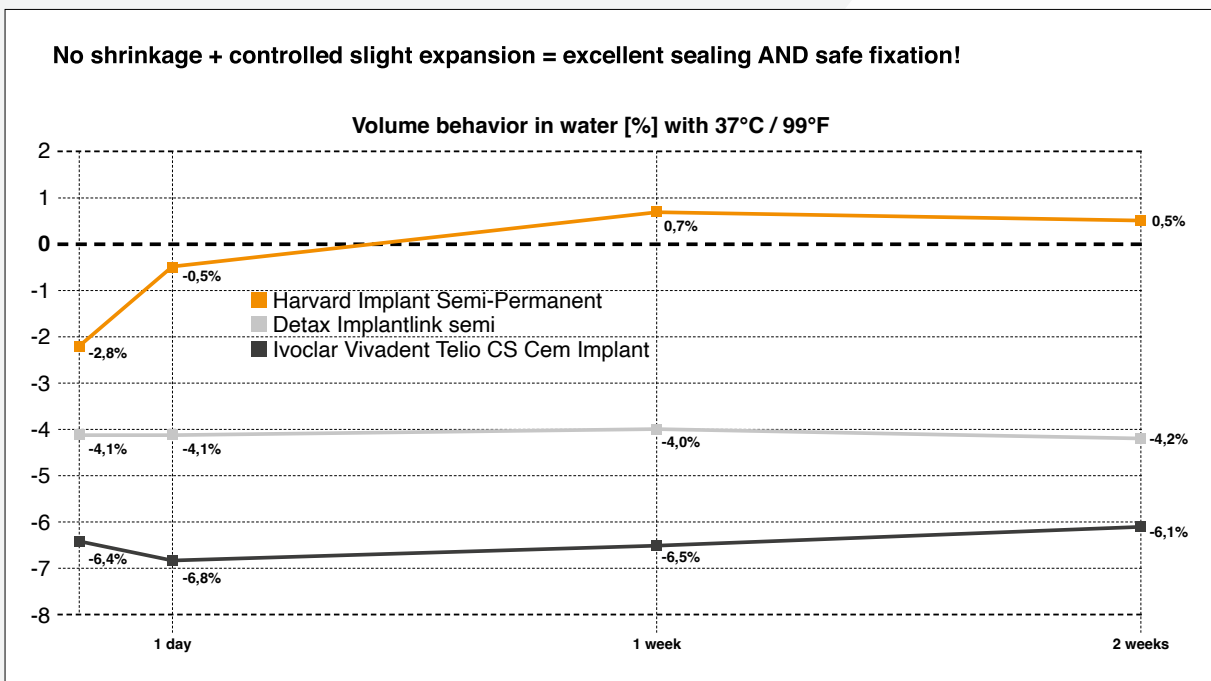


מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש"ח 324	15%	ש"ח 381	צמנט לשתלים Harvard מזרק 5 מ"ל




### Katana Cleaner לניקוי שחזורים לא ישירים לפני צמנטציה

לכל סוגי השחזורים, לשימוש אינטרא  
ואקסטרה אוראלי.

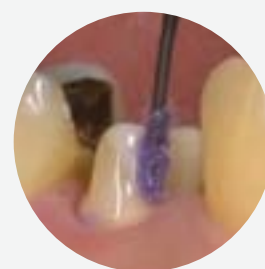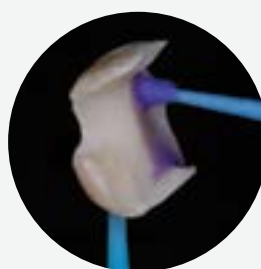

לסרטון  
המחשה:

### ניצוד החומר עובד:

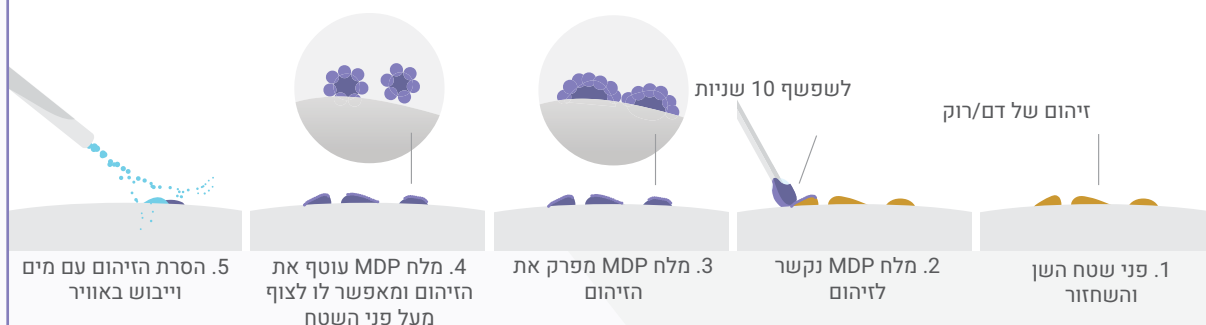

	KATANA™ CLEANER	ZIRCLEAN** (BISCO)
Intra-oral Use on Tooth Structure	Yes ✓	No ✗
Intra-oral Use on Implant Abutments	Yes ✓	No ✗
Extra-oral Use	Yes ✓	Yes ✓
Active Ingredient	MDP Salt (Surfactant)	Potassium Hydroxide
pH	4.5	13
Application Time	10 Seconds	20 Seconds
Handling	No Shaking	No Shaking



בקבוקון עם פתיחה משופרת -  
לפתיחה ביד אחת.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 174	10%	₪ 193	KATANA Cleaner, 4.0 ml

\* According to the Instructions for Use and official documentation  
\*\* Not a trademark of Kuraray Noritake Dental Inc.



**Cavex Rushbrush**  
מברשות שיניים מוכנות לשימוש



HA090 • Cavex RushBrush 100 pcs

**CAVEX**

מברשת שיניים מוכנה לשימוש, המאפשרת למטופלים לצחצח שיניים בקלות ובמהירות. המברשת מוספגת במשחת שיניים שקופה, ללא פלואוריד, ואין צורך להוסיף משחה. ראש המברשת קטן מספיק להגיע לכל איזור בפה, והסיבים המעוגלים עדינים לחניכיים.

איציאי להכנת  
המטופלים לטיפוח  
המראה

- ✓ מברשת פלסטיק מוכנה לשימוש
- ✓ הסיבים מכילים משחת שיניים
- ✓ אריזה היגיינית
- ✓ טעם מנטה מרענן
- ✓ מברשת רכה
- ✓ ראש מברשת קטן לדיוק מירבי
- ✓ 100 מברשות באריזה

**שניב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
104 ₪	139 ₪	Cavex Rush Brush מברשות 100

**Cavex Prophy paste**  
משחת פרופי



BW910 • Cavex ProphyPaste Regular 100g  
BW911 • Cavex ProphyPaste Fine 100g

**CAVEX**

משחת פרופי יעילה במיוחד בהסרת משקעים וכתמים הודות להרכב מיוחד של חלקיקי סיליקה.

**דרגת חספוס רגילה - Regular**

- RDA של 130 עד 150
- מעולה לניקוי יסודי, תוך כדי שמירה על פיניש חלק
- צבע תכלת
- טעם מנטה עדין

**דרגת חספוס Fine**

- RDA של 50 עד 60
- מעולה לניקוי עדין
- אפקט פוליש גבוה
- מתאימה לשימוש על שתלים, כתרים וגשרים
- צבע ורוד בהיר
- טעם פירות יער

- ✓ בטוחה ויעילה
- ✓ מכילה פלואוריד
- ✓ pH נייטרלי
- ✓ ללא התזות
- ✓ צמיגות אידיאלית
- ✓ מושלמת להכנה לפני הלבנת שיניים
- ✓ ידידותית למטופלים בזמן השימוש ואחרי

**שניב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
74 ₪	99 ₪	משחת פרופי Cavex, Fine/Regular 100 ג'

**Harvard TEMP Cem Esthetic**  
צמנט זמני אסתטי



**Harvard TEMP Cem**  
צמנט זמני ללא אוגנול



- צמנט בעל שקיפות גבוהה Translucent** ✓  
 צמנט זמני על בסיס Zinc Oxide ✓  
 ללא אוגנול ✓  
 הדבקה זמנית אופטימלית ✓  
 תכונות זרימה מעולות ✓  
 תכונות הדבקה טובות ✓  
 ניתן להסרה בקלות ✓  
 לא משאיר שאריות צמנט על הגדם או הליבה ✓



- צמנט זמני על בסיס Zinc Oxide ✓  
 ללא אוגנול ✓  
 הדבקה זמנית אופטימלית ✓  
 תכונות זרימה מעולות ✓  
 תכונות הדבקה טובות ✓  
 ניתן להסרה בקלות ✓  
 לא משאיר שאריות צמנט על הגדם או הליבה ✓

**הצמנט נשאר בכתר הזמני**  
 הצמנטים הזמניים של הרווד מאפשרים הסרה קלה של הכתר או הגשר הזמני. לאחר ההסרה, לא נותרים שאריות צמנט על הגדם או הליבה

**צמנט נשאר בשחזור הזמני ועל הגדם / ליבה**

הרווד טמפ אסתטיק

הרווד טמפ

טמפבונד (Kerr)

**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 239	₪ 319	Harvard Temp Esthetic 5ml

**שני ב 50%**


מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 239	₪ 319	Harvard Temp 10 ml

**Temporary C&B**  
חומר לכתרים וגשרים זמניים



03557 • Temporary C&B, 75g A1  
03558 • Temporary C&B, 75g A2  
03559 • Temporary C&B, 75g A3

- ✓ קומפוזיט ביס-אקרילי איכותי, מתקשה כימית לשחזורי כתרים וגשרים איכותיים לטווח הקצר והארוך
- ✓ אסתטיקה טבעית, גוונים בעלי שקיפות וברק
- ✓ עמיד מאוד בפני שברים, בעל התנגדות גבוהה למתיחה ושחיקה
- ✓ בעל פאזה מוגדרת של אלסטיות, הסרה בטוחה של שחזורים זמניים, טמפרטורת הקשייה מינימלית
- ✓ ניתן להשחזה ופוליש בקלות
- ✓ בעל טעם נייטרלי וצבע יציב לכל תקופת השימוש
- ✓ אפליקצייה ישירה בעזרת מזרק מידות 1:1
- ✓ גוונים A1, A2, A3

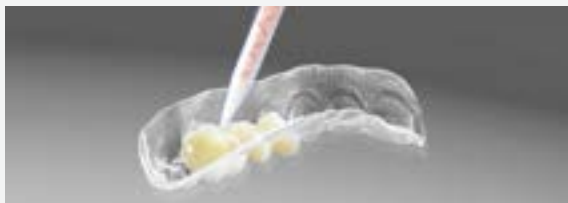


מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 303	15%	₪ 357	Temporary C&B

**NexTemp**  
צמנט זמני ללא אוגנול



3001471 • NexTemp STD 5 ml  
3001472 • NexTemp Clear 5 ml

- ✓ צמנט זמני אמין עם רטנציה אמינה שנשמרת בין המפגשים עם המתרפא, אך ניתנת להסרה בקלות בעת הצורך.
- ✓ ל NexTemp פורמולציה מיוחדת, הכוללת פוטסיום ניטרט, כלורהקסידין ופולואריד, אשר הוכחה במחקרים כמסייעת במניעת רגישות פוסט-אופרטיבית
- ✓ רטנציה אמינה עם אפשרות הסרה בקלות
- ✓ פורמולציה המעניקה איטום שולי מצויין ללא שטיפה של החומר
- ✓ ללא אוגנול - אין הפרעה לצמנטציה הסופית של השחזור
- ✓ מסייע במניעת רגישות פוסט אופרטיבית
- ✓ גוון נייטרלי המשתלב היטב עם השחזור ואינו משתקף
- ✓ חדש - גוון שקוף!

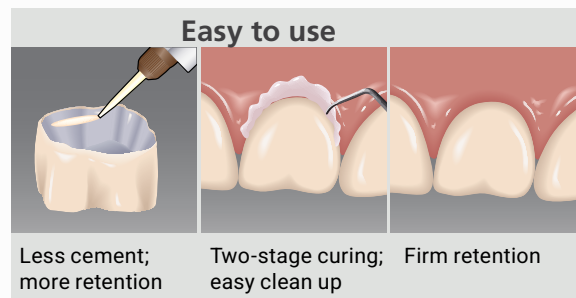

\* Total oral set time in 4-5 minutes

**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 204	₪ 272	NexTemp זמני ללא אוגנול


## Scout Race להכנה ראשונית של תעלות עקומות במיוחד



### תכולת אריזה:

- 3 פוצרים (2 מכל סוג): ISO 10/.02, 15/.02, 20/.02
- אורכים: 21, 25, 31 מ"מ
- מהירות אופטימלית: 800 rpm (מינימום 600 rpm)
- טורק: 1.5 Ncm

Scout Race הוא רצף של 3 פוצרים עם שיפוע .02 וגדלים 10, 15 ו 20, המשמשים להכנה מכנית של תעלות עם פיתולים רבים או בצורת S. המעבר הראשון עם הפוצר הממונע מבוצע לאחר קביעת האורך בעזרת פוצר K-File ידני או אפקס לוקייטור. עיצוב התעלה (Shaping) יבוצע בעזרת פוצרים אחרים (למשל XP Endo Rise Shaper או Race Evo).

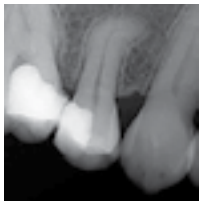

Pre-op: Pulpitis



Difficulty



Post-op: 35/.04

מקרה 1: תעלה עם פיתול בצורת S באפקס



Pre-op: Pulpitis



Difficulty



Post-op: MB & DB - 35/.04  
P - 50/.04

מקרה 2: תעלות חסומות או הרוטות

Cases: courtesy of Dr. G. Debelian (No)

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש"ח 337	15%	ש"ח 396	Scout Race set



RaCe  
RACE EVO

SWISS MADE

**+ 40%**  
גמישים יותר

**x 2.8**  
עמידים יותר לשבר  
ביחס ל race

**+ 50%**  
יעילים יותר  
בחיתוך דנטין

FKG  
swiss endo

## RACE® EVO

# מבצע 5+1

ניתן לערבב בין הגדלים השונים,  
הזול מביניהם במתנה.

מחיר בקניית 5+1	מחיר	תיאור המוצר
₪ 272	₪ 326	Race EVO 010-050 6 pcs (21mm/25mm/31mm)
₪ 136	₪ 163	Race EVO sequence 3 pcs 21/25/31mm

## Race Evo פוצרים בטוחים מהירים וגמישים להכנת תעלות שורש

כל פוצר בחתך משולש, קצה חלק ובטוח, להבים בעיצוב ייחודי להפחתת התחפרות בתעלות, טיפול תרמי ואלקטרופולישינג לגמישות אופטימלית ועמידות מקסימלית לשבר.

**התוצאה:** בטיחות, יעילות ושליטה מירבית בניקוי והכנת התעלות.

מתכת ניקל טיטניום בהכנה ייחודית ומאוזנת בתעלת השורש:

**80% אוסנייט** לחיתוך יעיל ומהיר  
**20% מרטסנייט** להגדלת העמידות לשבר, גמישות מקסימלית בתעלות צרות וכפופות.

מהירות מומלצת להכנה בטוחה מדוייקת ומהירה:  
**1,000 סל"ד, טורק 1.5** (אפשר גם 800 סל"ד)

## הגדלים הקיימים ל RACE EVO:

ISO %	10	15	20	25	30	35	40	45	50
2	●	●	●		●				
4	●	●	●	●	●	●	●		●
6		●		●	●	●	●		
8				●					

קישור לוובינר של ד"ר רונלד ויגלר:

Race Evo - The ultimate file evolution - When Safety and efficacy meet



הוובינר בעברית

### Irritrol תמיסת איריגציה לתעלות שורש



### IRRIFLEX® Flexible root canal irrigation needle



#### שטיפה, ניקוי וחיטוי של התעלה בשלב אחד!

תמיסה לאיריגציה של תעלות, לשטיפה אחרונה אחרי סודיום היפוכלורית. איריטרול מחטא באופן אפקטיבי, מסיר smear layer, ועדין על הדנטין.

• מבטל את הצורך בשני שלבים של איריגציה עם EDTA וכלורהקסידין

- חסכוני בזמן ובעלויות
- מחטא ברמת של 99.99%
- מסיר smear layer בצורה פחות אגרסיבית מאיריגנטים אחרים, ולכן גורם לפחות דמינרליזציה של הדנטין
- בעל צבע ירוק המאפשר זיהוי קל ע"י הרופא. והסייעת

#### גמישות

בניגוד למחטי שטיפה ממתכת, IrriFlex® מתאים את עצמו בקלות לאנטומיה של תעלות שורש מורכבות. הגמישות של גוף הפוליפרופילן מאפשרת למחט גישה לאזור האפיקלי, בלי התנגדות או נזק לקירות הדנטינלים.

#### אפקטיביות

ל IrriFlex® שתי יציאות צדדיות בקצה, ממוקמות גב אל גב. מאפיין ייחודי זה מייצר איריגציה מאוזנת, בעזרת שני זרמים מדויקים המכוונים הישר לקירות הדנטינלים.

צורת הטייפר של המחט מתאימה את עצמה לצורת התעלה. עצמת הזרימה של נוזל האיריגציה אחידה כאשר הנוזל עובר לאיזור הכותרתי, דבר הממקסם את כח הגזירה והאלימינציה של לכלוך, smear layer וביופילם.

מחטי IrriFlex® מיוצרים בשוויץ. הם מיוצרים בחדר נקי וארוזים בנפרד.



מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 422	15%	₪ 497	Irritrol 473ml





- S1XB0.00.0AC.FK • Finisher, #25, 21mm 3 pcs
- S1XB0.00.0AA.FK • Finisher, #25, 25mm 3 pcs
- S1XB0.00.0AE.FK • Finisher R, #30, 21mm 3 pcs
- S1XB0.00.0AD.FK • Finisher R, #30, 25mm 3 pcs
- S1XB0.00.0AQ.FK • Finisher R, #30, 31mm 3 pcs

### Finisher R לטיפול שורש חוזרים

Finisher R הוא מכשיר הדומה בתכונותיו ל Finisher 25,21 ה Finisher R מגיע בקוטר ISO 30 ובאורכים 25,21 או 31 מ"מ. מנקה שאריות חומרי מילוי ובכלל לכל מקרה בו יש צורך בהכנת התעלה עד קוטר 30.



**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 329	₪ 439	Finisher / Finisher R

### Finisher לטיפול שורש במימד השלישי

#### המימד השלישי - מורכבות תעלות השורש

מע' תעלות השורש מורכבת ביותר: היא יכולה להיות אובלית או בצורת C, לעתים התעלות מפוצלות או איסתמוס מחבר בינהן. מכשירי NiTi סטנדרטיים לא עומדים במשימת ההכנה האופטימלית של המימד השלישי במע' התעלות המורכבת. הגמישות של המכשירים הסטנדרטים מאפשרת להכין תעלות בחתך עגול בלבד ולא מתאפשר ניקוי בחללים האירגולריים במימד השלישי (איסתמוס, צורת C, ספיגות פנימיות וכו').

מספר מחקרים מדגימים כי בשימוש במכשירי NiTi סטנדרטיים נוצר מגע רק עם 45-55% משטח הפנים של קירות התעלות. כדי לסלק זיהום ורקמה נמקית בחללים האירגולריים במימד השלישי הוצעו מספר טכניקות משלימות כמו שימוש בהיפוכלוריד בריכוז גבוה, או EDTA בכמויות גדולות, אולטרסאונד ולייזר. השימוש בכל הטכניקות המשלימות פתר באופן חלקי בלבד את בעיית הניקוי במימד השלישי.

#### הפתרון האופטימלי: Finisher

Finisher הוא מכשיר מהפכני לטיפול בקירות התעלה במימד השלישי. גמישותו הרבה מלווה בתנועה סיבובית ייחודית המאפשרת מגע מקסימלי עם יותר שטח פנים בדפנות התעלה בחללים האירגולריים.

**קוטר הניקוי של Finisher בתעלה הוא פי 100 יותר מקוטר מכשיר NiTi סטנדרטי.**

#### מקסימום ניקוי תעלה - מינימום הסרת דנטין

האנטומיה המקורית של התעלה



הכנה של תעלה עם מכשירי NiTi



התעלה נוקתה באופן חלקי. חיידקים ושאריות דנטין ורקמה נקרוטית מצטברים באזורים שלא נוקו במימד השלישי

הכנה של תעלה עם Finisher משולב במכשירי NiTi סטנדרטיים




שימוש אידיאלי ב Finisher לאחר כל הכנה של תעלות השורש מביא לניקוי מאכסימלי של תעלות השורש גם במימד השלישי עם מינימום הסרת דנטין ושמידה על חוזק השורש

■ האיזור שצריך לנקות ■ האזור שנוקה

# האתגר:

פוצרים מסוג NiTi שינו את תחום האנדודונטיה. למרות תרומתם הרבה, יש עדיין חסרונות מסויימים לרוב הפוצרים הללו:

## 1. עיצוב תעלה לא אנטומית

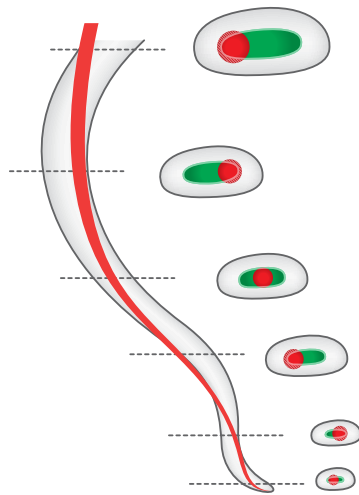

- תעלת השורש
- האיזור שיש לנקות
- האיזור שנוקה
- דנטין מוחלש

תעלה שעברה הכנה לא מספקת



תעלה שעברה הכנת יתר



תעלות שורש הן מערכות מורכבות. לרוב התעלות צורה אירגולרית מבחינה אנטומית. רוב הפוצרים הקונבנציונליים יכולים לנקות בצורה עגולה בלבד, ולכן לא יכולים להגיע לחלקים חשובים בתעלה בזמן הטיפול.


## 2. הפעלת טורק מופרז / עייפות החומר



לפוצרי NiTi קלאסיים נטייה לעיוות והפרדות, והם מפעילים לחץ לא רצוי על דפנות התעלה

(לשם השוואה - פוצרים מסדרת Protaper Ultimate עובדים בטורק Ncm 4-5.2, פוצרים מסדרת HyFlex עובדים בטורק Ncm 2.5 לעומת Ncm 1-1.5 בלבד בכל הפוצרים של FKG)

## 3. יש צורך במספר רב של פוצרים להכנת התעלה

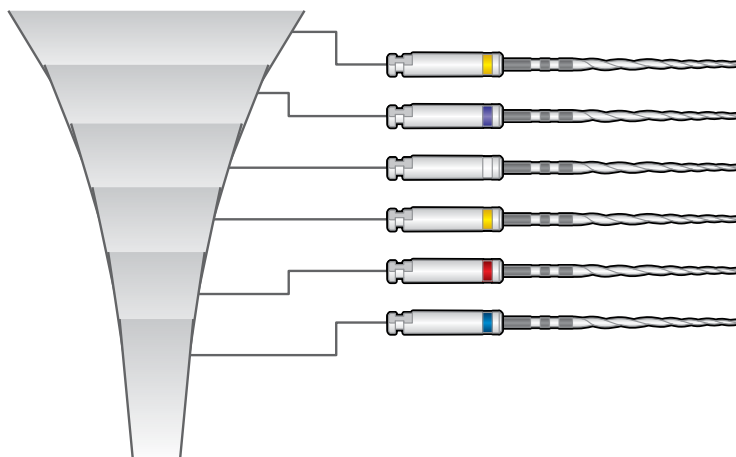

על מנת להפחית עייפות סיבובית ועיוות של הפוצר משתמשים בטכניקה של שימוש במספר פוצרים ברצף. העלות עולה ואיתה זמן הכסא.



# הפתרון:

## XP ENDO® Rise Shaper



### טכנולוגיית MaxWire®

- > Superelasticity, extreme flexibility and agility of the instrument.
- > Shape memory principles enabling the instrument to take on a predefined shape at 35°C.
- > Ability to expand within the root canal.



### Booster Tip

- > Six cutting edges for optimal guidance.
- > Starts shaping at minimum ISO diameter 15 to achieve a final diameter of ISO 30 with only one instrument.



XP Endo Rise Shaper הוא מכשיר בעל ספקטרום עיצוב רחב ומשמש לפישוט רצף הפעולות האנדודונטי בצורה רדיקלית. מכשיר זה הינו התגלמות התרומה של החדשנות לרפואת השיניים, ומשלב טכנולוגיה ומומחיות.

טכנולוגיית ה MaxWire® וה booster Tip משולבות והופכות את ה XP Endo Rise Shaper ל"פוצר אחד לעיצוב התעלה". יש לו יכולת להתחיל בקוטר ISO 15 ולהגיע לקוטר ISO 30, וגם להגדיל את השיפוע מ 01. לפחות עד 04.

**תכונה זו מאפשרת להגיע להכנה סופית של התעלה במינימום של 30/04 בעזרת מכשיר אחד בלבד**

ה XP Endo Rise Shaper הוא המכשיר לטיפול במרבית תעלות השורש.

תעלה שעברה הכנה אנטומית



XP Endo Rise  
זרימה חופשית עם מערבולות




Debris (no compaction)

Stress applied to the canal wall

Space available within the canal lumina (84%)

פוצרים מסורתיים  
צבירת דברי/דחיסה

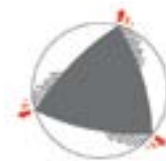

Compacted debris


Stress applied to the canal wall

Space available within the canal lumina (46%)

**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 524	₪ 699	XP Endo Rise Shaper (6 יח')

XP endo Rise מצוין גם לחידוש טיפול שורש:

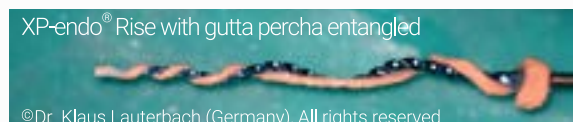

©Dr. Klaus Lauterbach (Germany), All rights reserved

**TotalFill BC Sealer**  
**סתימת שורש ביו קרמית**



**TotalFill RRM**  
**חומר לתיקון ניקובים וכיפוי מוך**



✓ **15 שנות קיום**  
 ✓ **מעל 150 מחקרים**  
 ✓ **למעלה מ 50,000,000 טיפולים ברחבי עולם**

להבדיל מחומרי איטום סטנדרטיים המורכבים מבסיס וזרז (קטליסט), TotalFill® BC Sealer משתמש בלחות הקיימת באופן טבעי בטובולים הדנטינלים לאתחול תהליך ההקשייה.

TotalFill® BC Sealer הינו חומר איטום הידרופילי בעל רדיואופקיות גבוהה. החומר יוצר שכבת הידרוקסי אפטיט בזמן התקשותו והוא נקשר כימית לדנטין.

TotalFill® BC Sealer הוא אנטיבקטריאלי בזמן ההקשייה בשל pH בסיסי מאוד, ובניגוד לחומרי איטום רגילים,

**ה TotalFill® BC Sealer אינו מתכווץ כלל!**

- ✓ ביוקומפטבילי ואוסטאוגני
- ✓ חיבור כימי לדנטין
- ✓ אנטיבקטריאלי (pH > 12)
- ✓ רדיואופקי ברמה גבוהה
- ✓ הידרופילי – סופח מים בהתקשות
- ✓ זמן עבודה אידיאלי
- ✓ מעורבב מראש במזרק
- ✓ אפס התכווצות
- ✓ מייצר הידרוקסי אפטיט

TotalFill® RRM חומר לתיקונים repair material, לטיפול בניקובים (פרפורציות בשורש), בשורשים עם פתח חודי רחב, סתימה רטרוגרדית בכירורגיה אנדודונטית וכיפוי מוך בשיניים ויטליות.

**מתקשה תוך 20 דקות.**

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 744	20%	₪ 930	TotalFill BC sealer - יח' אחת
₪ 651	30%	₪ 930	TotalFill BC sealer - שתי יח'
₪ 595	36%	₪ 930	TotalFill BC sealer - שלוש יח' ויותר
₪ 671	15%	₪ 789	TotalFill RRM - יח' אחת
₪ 592	25%	₪ 789	TotalFill RRM - שתי יח'

**מחקרים ומאמרים על TotalFill BC Sealer**

**Characterization and Assessment of Physical Properties of 3 Single Syringe Hydraulic Cement–based Sealers**

Veksina Raman, BDS, MDS, and Josette Camilleri, BChD, FDS, RCPS (Glasg), MPhil, PhD, FICD, FADM, FIMMM, FHEA


3 key findings from this research<sup>1</sup>:

**1. Up to 4.8x superior Calcium release for TotalFill® BC Sealer™ vs. AH Plus Bioceramic Sealer.**

- TotalFill® BC Sealer™ released 24% more Calcium at day 28 vs. day 7.
- AH Plus Bioceramic Sealer released 58% less Calcium at day 28 vs. day 7.
- TotalFill® BC Sealer™ released 4.8x more Calcium vs. AH Plus Bioceramic Sealer at day 28.

**2. AH Plus Bioceramic Sealer disintegrated in immersion solution after 7 days.** This is due to the lower percentage (5%-15%) of calcium silicate in AH Plus Bioceramic Sealer. TotalFill® BC Sealer™ contains up to 50% calcium silicate and 4% of calcium hydroxide.

**3. AH Plus Bioceramic Sealer leached Lithium.**

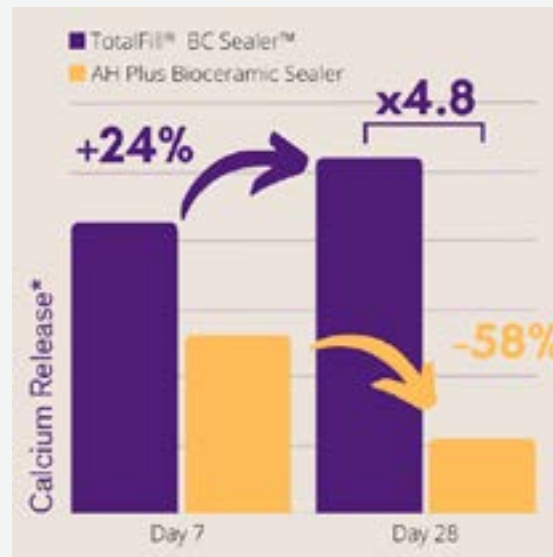

<sup>1</sup>For the full article scan the QR code

Due to its unique composition, TotalFill® BC Sealer™ has demonstrated safety and efficacy in more than 80 publications.
















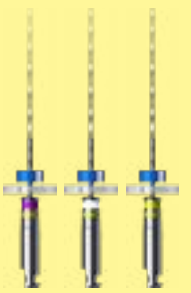


for scientific overview of TotalFill® products scan the QR code

Bioceramic sealers are indicated for the following uses:

- Permanent obturation of the root canal following vital pulp-extirpation.
- Permanent obturation of the root canal following removal of infected or necrotic pulp and placement of intracanal dressings.

TotalFill® BC Sealer™ for cold obturation or TotalFill® BC Sealer™ HiFlow for warm obturation.

<p><b>Retreatment</b></p>	<p>XP endo Rise Shaper</p>  <p>Finisher R</p> 	
<p><b>Obturation</b></p>	<p>TotalFill BC Points</p>  <p>TotalFill BC Sealer</p>  <p>TotalFill BC RRM Putty</p>  <p>Sterile Paper Points</p>  <p>Sensipast</p> 	
<p><b>Cleaning</b></p>	<p>Finisher</p>  <p>Finisher R</p>  <p>Irriflex</p>  <p>Irritrol</p> 	
<p><b>Shaping</b></p>	<p>XP endo Rise Shaper</p> 	<p>Race Evo 15 - 50 2% / 4%</p> 
<p><b>Glide</b></p>	<p>Standart:</p> <p>XP endo Rise Glider</p> 	<p>Race Evo 10 + 15 2% / 4%</p>  <p>Difficult cases: (canals with extreme curvature, S type, calcified canals)</p> <p>Scout Race</p> 

**Hysolate Black Heavy**  
סכר גומי שחור heavy



60031353 • Hysolate Latex 6x6 Heavy, 36 pieces

- ✓ מודפס מראש עם תבנית חירור - חסכון בשלבי עבודה
- ✓ עשוי לטקס ללא אבקה
- ✓ מפחית חשיפה לחלקיקים אלרגניים
- ✓ צבע שחור מתאים במיוחד לצילום תמונות
- ✓ מבודד מלחות וזיהומים בזמן העבודה

7 טיפים לשימוש בסכר גומי:



Hysolate Black Heavy הינו ללא אבקה, ויש בו רמה נמוכה של חלבונים, כך שהמטופלים כמו גם הצוות נחשפים פחות לחלקיקים אלרגניים והסיכון לפתח אלרגיה ללטקס יורד.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 148	15%	₪ 174	סכר גומי Hysolate black heavy

**Hysolate (Fiesta)**  
סכר גומי Scented



60034436 • Fiesta 6x6 Medium, 36 pieces  
60034435 • Fiesta 5x5 Medium, 52 pieces

**מבצע 4+1**

מחיר בקניית 4+1	מחיר	תיאור המוצר
₪ 119	₪ 149	סכר גומי פיאסטה 5x5 או 6x6

**Flexi Dam**  
סכר גומי ללא לטקס



RK390035 • Flexi Dam Non Latex 6x6

סכר גומי גמיש ביותר, ללא לטקס. מתכווץ מסביב לשן לבידוד אפקטיבי ושליטה מיטבית על הלחות. אינו גורם לתגובה אלרגית לרופאים וסייעות הרגישים ללטקס, ואף לא למתרפא. 30 יחידות באריזה.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 251	15%	₪ 295	סכר גומי Flexi Dam ללא לטקס 30 יח'

**גוטה פרקה ארוכה  
תואם דה טריי, 100 יח'**



H0122X • Gutta Percha Points 28mm \*\* 100pts  
\*\* = XF, FF, MF, F, FM, M

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
110 ₪	10%	122 ₪	גוטה פרקה ארוכה, תואם דה טריי

**פני נייר סטריליים  
שיפוע .02, 180 יח'**



RK3448\*\* • Paper points, sterile \*\* 180 pcs  
\*\* = 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
102 ₪	15%	120 ₪	פני נייר סטריליים Roeko .02 שיפוע

**TotalFill BC Points .04  
גוטה פרקה עם ננו-חלקיקים  
ביוקרמיים, שיפוע .04, 60 יח'**



08650.04.\*\*.RE • TotalFill BC Points 60 pcs (\*\*=ISO)

פני גוטה פרקה מוספגים בננו-חלקיקים ביוקרמיים, הנקשרים ל TotalFill BC Sealer ליצירת איטום מושלם. שיפוע .04, גדלי ISO, 60 יח'.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
141 ₪	15%	166 ₪	גוטה פרקה TotalFill שיפוע .04, 60 יח'

**פני נייר סטריליים  
שיפוע .04, 200 יח'**



08610.04.0\*\*.BC • Paper Points, 4%, # \*\*, white  
\*\* = 15, 20, 25, 30, 35, 40

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
159 ₪	15%	187 ₪	פני נייר סטריליים FKG .04 שיפוע

**Clamps**  
וויים לסכר גומי

ANTERIOR						
	Standard   #9 H02763	Standard   #212 H07792	Brinker   #B4 H01051	Brinker   #B5 H01052	Brinker   #B6 H01053	
PREMOLAR						
	Standard   #1 H02703	Standard   #2 H02761	Standard   #2A H05688			
MOLAR						
	Standard   #3 H05689	Standard   #4 H02704	Standard   #7 H02758	Standard   #8 H02760	Standard   #8A H02759	Standard   #12A H02706
	Standard   #13A H02705	Standard   #14 H05690	Standard   #14A H02757	Brinker   #B1 H01048	Brinker   #B2 H01049	Brinker   #B3 H01050

תיאור המוצר	מחיר	מחיר בקניית 5+1
וו לסכר גומי	88 ₪	73 ₪

**מבצע 5+1**

**Brinker set**  
סט 6 וויים לסכר גומי מסוג ברינקר



תיאור המוצר	מחיר	הנחה	מחיר סופי
סט 9 וויים system-9	626 ₪	15%	532 ₪
סט 6 וויים מסוג ברינקר	440 ₪	15%	374 ₪

**System 9**  
סט 9 וויים לסכר גומי

סט 9 וויים: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A



## NTI

## התקן מהפכני לשיפור איכות חיי המטופלים



שיטה אפקטיבית המאשרת  
ע"י ה FDA למניעת מיגרנות,  
ללא תרופות.

## אינדיקציות לשימוש ב NTI:

מניעה של:

- TMD
- ברוקסיזם
- כאבי ראש כרוניים
- מיגרנות
- מניעה של טראומה אוקלוזלית:
  - בהשתלות
  - לאחר התקנת שחזור חדש



- ✓ ללא תרופות
- ✓ ללא זריקות
- ✓ ללא ניתוח
- ✓ ללא תופעות לוואי
- ✓ בטוח לשימוש בהריון
- ✓ טיפול chair side מלא

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 359	20%	ש 446	NTI Standart 2 pcs
ש 896	20%	ש 1,119	NTI Standart 6 pcs



**Pola Rapid**  
הלבנת שיניים מהירה במרפאה



7700505 • Pola Rapid

**2 מזרקי קומפוזיט Luna 2 במתנה**

מחיר	תיאור המוצר
₪ 765	Pola Rapid + 2 קומפוזיט מתנה

תכולת ערכה ל-3 מטופלים:  
3 מזרקי פולה רפיד 38%, 2.8 מ"ל כ"א  
3 מזרקי מגן חניכיים 1 ג' כ"א  
אקססוריז

**Pola Office Plus**  
הלבנת שיניים 37.5% במרפאה



7700455 • Pola Office Plus

תכולת ערכה ל-3 מטופלים:  
3 מזרקי פולה אופיס פלוס 37.5%, 2.8 מ"ל כ"א  
3 מזרקי מגן חניכיים 1 ג' כ"א  
אקססוריז

**Pola Office**  
הלבנת שיניים במרפאה



7700215 • Pola Office

תכולת ערכה ל-3 מטופלים:  
6 מזרקי הידרוגן פרוקסיד 35%, 2 מ"ל כ"א  
6 צנצנות אבקה 0.3 ג' כ"א  
3 מזרקי מגן חניכיים 1 ג' כ"א  
אקססוריז

מחיר	מחיר	תיאור המוצר
₪ 449	₪ 599	Pola Office בקניית 3+1
₪ 521	₪ 695	Pola Office Plus

**מבצע 3+1**

## AT HOME TREATMENTS

### Pola Day

9.5% hydrogen peroxide

2 x 15 minute applications or  
1 x 30 minute application per day

### Pola Night

16% carbamide peroxide

90 minutes per day to overnight

22% carbamide peroxide

1 x 45 minutes per day

### Pola Day CP

35% carbamide peroxide

15 minutes wear time at home or  
30 minutes for jump start in dental office

## מבצע 5+1 או 7+3

על כל הערכות להלבנה ביתית  
עד גמר המלאי  
ניתן לערבב בין הסוגים השונים

5+1 בקנית	מחיר	תיאור המוצר
ש"ח 248	ש"ח 297	הלבנת שיניים ביתית Pola Day / Pola Night

7+3 בקנית	מחיר	תיאור המוצר
ש"ח 208	ש"ח 297	הלבנת שיניים ביתית Pola Day / Pola Night

### Pola Day הלבנת שיניים ביתית



### Pola Day CP 35% הלבנת שיניים במרפאה או בית



### Pola Night הלבנת שיניים ביתית



- תכולת כל ערכה:
- 4 מזורקים, 3 ג' כל אחד
  - פלטות להכנת סדים
  - קופסה לשמירת הסדים



## Pola Light הלבנת שיניים ביתית

מערכת הלבנת שיניים חדשה המעניקה חיוך זוהר ובעל בטחון עצמי תוך 5 ימים בלבד! מערכת הלבנת השיניים Pola Light משלבת בין פורמולציות ההלבנה זוכות הפרסים של Pola, עם פיה מוארת LED. מערכת משולבת זו מאיצה את תוצאות ההלבנה. הפיה של ה-Pola Light הינה ניידת, נטענת וקלה לשימוש ללא כבל מחובר. בחירה המושלמת להלבנה מהירה באופן מיידי, ולטיפולי תחזוקה בעתיד. התערובת המיוחדת של קונדישינרים, משככים ותכולת המים הגבוהה מסייעת להפחית רגישות, והופכת את Pola לאחת ממערכות הלבנת השיניים הנוחות ביותר.



### הערכה מכילה:

- פיה (Mouthpiece) מוארת LED
- 3 מזרקי חומר הבהרה Pola Day (Hydrogen Peroxide 6%)
- כבל הטענה USB
- הוראות שימוש

## מבצע 5+1

תיאור המוצר	מחיר	בקניית 5+1
Pola Light Kit	₪ 551	₪ 459

**Cavex FiniSense**  
דיסנסייזר



למניעת רגישות יתר צווארית ופוסט אופרטיבית

**SOOTHE**  
הפחתת רגישות מיידית



**אינדיקציות**

- הפגת כאב הנגרם בשל שורשי שן או דנטין חשופים
- מניעת רגישות יתר פוסט אופרטיבית והפגתה
- לשימוש תחת כל סוגי חומרי המילוי, כתרם וגשרים

✓ פועל תוך 30 שניות

✓ פעיל למשך 12 חודשים ויותר

✓ אינו משאיר שכבה על פני השטח (film)

✓ קל לשימוש לרופא ולמתרפא

✓ טיפול ללא כאבים

✓ 150 אפליקציות בבקבוק אחד


**אינדיקציות**

הפחתה מיידית של רגישות עקב:

- שינויים כימיים
- שינויי טמפרטורה
- הלבנת שיניים

מכיל: ג'ל פוטסיום ניטרט 6% בשחרור מושהה + יון פלואוריד 0.1%

אופן השימוש:  
למרוח על האיזור המבוקש.

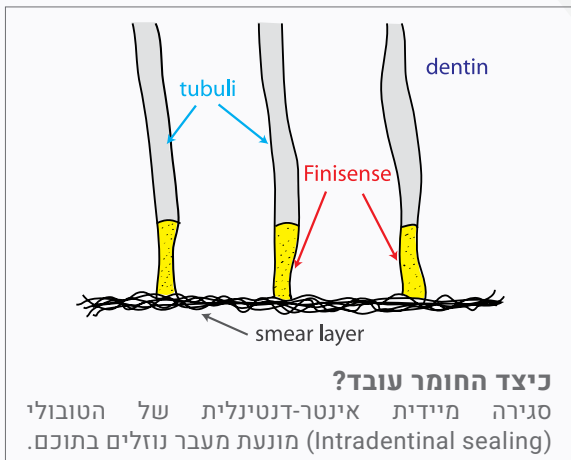

אינו מפריע לתהליך הלבנת השיניים!

ניתן להשתמש ב soothe במהלך ההלבנת השיניים ו/או לאחריה


תיאור המוצר	מחיר	הנחה	מחיר סופי
FiniSense 5ml	154 ₪	20%	123 ₪

תיאור המוצר	מחיר	הנחה	מחיר סופי
Soothe 1.2ml 4 מזרקים	210 ₪	15%	179 ₪

## Enamel Pro Varnish ורניש פלואוריד להפחתת רגישות וחיזוק מבנה השן



9007541 • EPV(35) bubble gum  
9007544 • EPV(200) bubble gum  
9007543 • EPV(200) Strawberries&Cream

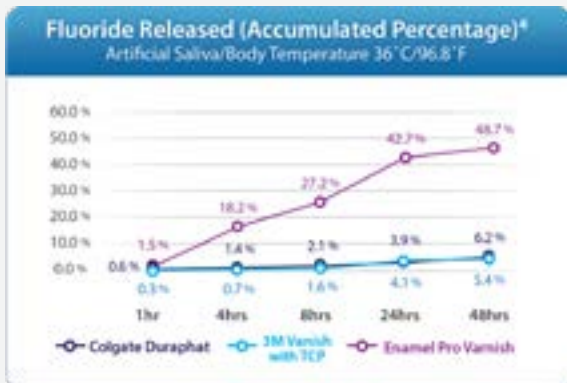

**ACP** Amorphous Calcium Phosphate Enamel Pro Varnish מפחית רגישות ע"י החדרת ACP ישירות לתוך זירוז רה-מינרליזציה וחיזוק מבנה השן. הטובולי הפתוחים של הדנטין. מכיל אותה כמות פלואוריד כמו ורנישים אחרים, אולם בשל טכנולוגיית ה ACP מועברים למעשה **200% יותר פלואוריד** לאמייל ויותר פלואוריד זמין לכל שטח פני השן. הענות המתרפאים גבוהה בשל הצבע הלבן האסתטי והטעמים הנעימים.

- ✓ בשימוש משרד הבריאות
- ✓ וקופות החולים
- ✓ כשר
- ✓ ללא גלוטן
- ✓ אינו מכיל חלב ומוצרי



הורניש מגיע במנות אישיות, עם מברשת חד פעמית להנחה מיידית. מהירה והיגיינית.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 246	20%	₪ 303	Enamel Pro Varnish '35 יח'
₪ 1,119	24%	₪ 1,472	Enamel Pro Varnish '200 יח'



מומלץ ע"י  
ארגון הבריאות  
העולמי WHO



Riva Star/ Riva Star Aqua  
מעלים רגישות ומעלים ביו-פילם



Riva Star Aqua הוא הדור החדש של Riva Star

החומר הפעיל הוא SF (או AgF) אך התמיסה היא על בסיס מים ולא אמוניה.

SF קלינית בפעילות ל Riva Star

מחקרים קליניים הוכיחו כי ה SF (Silver-Flouride) Riva Star Aqua זהה באפקטיביות ל Riva Star ב 38% ב Riva Star ב 38%

Riva Star היא תמיסה של SDF + KI

המשמשת כמעלימת רגישות בשיניים. היא מעלימה מיידית רגישות בשן - טכניקת עבודה זעיר פולשנית (עשויה למנוע את הצורך באלחוש). Riva Star מצויין לרפואת שיניים בגיל השלישי כמו גם במטופלים אשר סובלים מנגעי עששת חמורים, אך מפחדים מטיפול בכסא רופא השיניים. זהו טיפול מהדור החדש, מהיר ויעיל ההופך את החוויה ללא-טראומטית, והקלה לסובלים מכאב שיניים הנגרם מעששת.

יתרונות:

- ✓ אפקט העלמת רגישות מיידית הנמשך על פני שנתיים ויותר
- ✓ התהליך הדו-שלבי של Riva Star Aqua מצמצם את הסיכון להכתמה למינימום.
- ✓ ריח נעים יותר
- ✓ שיטה לא פולשנית
- ✓ אינהיביטור של ביו-פילם
- ✓ העדר האמוניה מצמצם גירוי רקמות רכות ומאפשר לעבוד ללא מגן חניכיים

יתרונות:

- ✓ אפקט העלמת רגישות הנמשך ע"פ שנתיים ויותר
- ✓ מגביר חוזק קישור של גלס יונומר לדנטין
- ✓ תהליך עבודה מוגן בפטנט - להבדיל ממוצרי SDF אחרים, התהליך הדו-שלבי של Riva Star מצמצם את הסיכון להכתמה למינימום.
- ✓ שיטה לא פולשנית.

כיצד פועל ה SDF?

כמעט עששת - SDF + KI מעניקים שלושה רכיבים פעילים לאתרים נגועים בעששת:

- **כסף Silver** תרכובות כסף משמשות כמרכיב אנטימיקרוביאלי ברפואת שיניים כבר למעלה ממאה שנה.
- **פלאוריד** משמש כאפקט בקטריוסטטי למניעת דהמינרליזציה נוספת של מבנה השן.
- **יודיד** פוטסיום יודיד משמש בצמידות ל SDF לאפקט אנטימיקרוביאלי חזק, כמו גם מפחית את הסיכוי להכתמת השיניים.

SDF (Silver diammineflouride) הוא נזל אנטימיקרוביאלי אשר ניתן להשתמש בו לטיפול בעששת (קנדה, ברזיל ודרא"פ) לסייע בעצירת רקבון השן. ניתן להשתמש ב-SDF לטיפול ברגישות בשיניים. מומלץ למרוח SDF כל 6 עד 12 חודשים, אך ניתן להשתמש בתדירות גבוהה יותר עפ"י שיקול דעת רופא/ת השיניים (מיני שבוע בין מריחות). טיפול עם SDF לא תמיד ימנע את הצורך בשחזורים לשם תיקון פונקציונליות או אסתטיקה.

תיאור המוצר	מחיר	הנחה	מחיר סופי
Riva Star / Aqua 1.5ml + 3ml	409 ₪	10%	368 ₪

**Teethmate Desensitizer**  
מעלים רגישות באופן טבעי



- לכיסוי דנטין חשוף או מטופל כימית/מכנית לשימוש מתחת לבונד או צמנט ללא פגיעה בחוזק הקישור
- לדנטין חשוף בשל צחצוח, נסיגת חניכיים, מחלה פריודונטית וכד'
- טיפול בדנטין לאחר ניקוי שיניים מכני לפני או אחרי הלבנת שיניים (אמייל ודנטין)
- טיפול בדנטין שעבר הכנה לפני סתימות או שחזורים

**Teethmate desensitizer** מעלים רגישות בשיניים באופן אפקטיבי ולאורך זמן, ולראשונה גם בצורה טבעית. החומר גורם לייצור הידרוקסיאפטיט (HAp), בדיוק במקום בו הוא נדרש לסגירת טובולי דנטנלי וסדקים באמייל. בגלל שהחומר טבעי, הוא ידידותי לרקמות הרכות וניתן להשתמש בו בבטחון.

- ✓ לדנטין
- ✓ לאמייל
- ✓ לשיניים מושחזות

Teethmate Desensitizer מורכב אבקה ונוזל שמעורבבים יחד ליצירת הידרוקסיאפטיט. ניתן להשתמש בו לכיסוי דנטין חשוף או שעבר הכנה כימית/מכנית, באופן בלתי נראה. החומר לא פוגע בחוזק קישור של בונד או צמנט במידה ומשתמשים בו לפני הנחתם.



תיאור המוצר	מחיר	הנחה	מחיר סופי
Teethmate Intro set 1.2g + 1ml	₪ 443	10%	₪ 399

### ImpreSafe חומר חיטוי מטבעים



HA053 • Impresafe set  
HA050 • Impresafe refill 1L

1 ליטר מרוכז = 33 ליטר תמיסה

לחיטוי מטבעי אלגינט, פוליאטר וסיליקון

- ✓ 3 דקות בלבד לחיסול בקטריה, פטריות ווירוסים
- ✓ יעילות מוכחת כנגד covid-19
- ✓ אין השפעה שלילית על פני שטח המטבע
- ✓ מרוכז ביותר - חסכוני באחסון
- ✓ ליטר אחד = 33 ליטר נוזל חיטוי מוכן לשימוש - חסכוני גם בעלויות!
- ✓ ללא אלדהיד
- ✓ ניחוח נייטרלי
- ✓ מגיע כערכה מוכנה לשימוש המרפאה
- ✓ עומד בכל דרישות התקנים האירופאים
- ✓ יעילות מוכחת בבדיקות מעבדה חיצוניות

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 348	15%	ש 409	אימפרסייף רפיל 1 ל'

### Sanitizer Surfaces S2 תרסיס לחיטוי משטחים ללא אלכוהול



132062 • Sanitizer S2 750 ml spray foam

- ✓ תרסיס לחיטוי משטחים ללא אלכוהול
- ✓ מכיל אמוניום רבעוני לפי התקן
- ✓ בטוח לשימוש על כל סוגי המשטחים
- ✓ ניחוח הדריים נעים
- ✓ זמן חשיפה מינימלי 30 שניות בלבד
- ✓ תוצרת שוויץ
- ✓ תרסיס עדין 750 מ"ל

**VIRUCIDE**  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

מבצע 5+1

מחיר בקניית 5+1	מחיר	תיאור המוצר
ש 53	ש 64	Sanitizer 2 750 ml

### GreenClean חומר לניקוי כפות מידה משאריות אלגינט וגבס

- מסיר שאריות אלגינט וגבס מכפות מידה, כלי יד ואקססוריז אחרים
- פירוק עדין ע"י המסה
- pH נייטרלי
- ייחודית לעור
- מתפרק ביולוגית (ידידותי לסביבה)
- ריח הדריים נעים
- 1 ק"ג מנקה מעל 500 כפות מידה

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 142	15%	ש 167	Green Clean 1 Kg



HA001 • Greenclean 1 Kg



## Sanitizer Instruments E חומר לניקוי וחיטוי כלי יד ובוררים



132164 • Sanitizer Instrument E 1L




- ✓ **חומר אחד בלבד** לניקוי וחיטוי כלי ובוררים
- ✓ אריזה של 1 ליטר - תופס פחות מקום ומשמש להרבה יותר
- ✓ **חסכוני ביותר** - ליטר נוזל מרוכז = 200 ליטר תמיסה מוכנה לשימוש
- ✓ **מכיל אמוניום רבעוני ואנזימים לפי התקן**
- ✓ זמן חשיפה מינימלי - 5 דקות בלבד!
- ✓ מגן על הכלים בהשרייה ובאולטרסוניק
- ✓ תוצרת שוויץ

**ENZYMATIC**

**ENZYMES**  
0123456789

סרקו את הקוד לקריאת חוזר משה"ב: "הנחיות למניעת העברת זיהומים במרפאות שיניים"




השוואה בין סניטייזר אינסטרומנט E לבין המוצרים הפופולריים:

ID 215 / Dürr	Tri Enzymatic / Anios	Sanitizer Instrument E / Saniswiss	Special Rotative / Anios	ID 220 / Dürr	
✓	✓	✓	✓	✓	מכיל אמוניום רבעוני
✓	✓	✓	✗	✗	אנזימטי
1 %	1 %	0.5 %	ללא	ללא	דילול
100 ליטר	100 ליטר	<b>200 ליטר</b>	1 ליטר	1 ליטר	כמות תמיסה מוכנה מליטר נוזל מרוכז
30 דקות	5 דקות	5 דקות	1 דקה	15 דקות	זמן שהייה באמבט
✓	✓	✓	✓	✓	מתאים גם לאולטרסוני
✓	✓	✓	✗	✗	חיטוי כלי יד
✗	✗	✓	✓	✓	חיטוי מקדחים ובוררים

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 164	₪ 219	Sanitizer Instrument E 1L


הנתונים כפי שמופיעים בהוראות השימוש של המוצרים באתרי היצרנים

**שניב 50%**


## Traxodent משהה מבוססת המודנט לדחיקת חניכיים



9007093 • Traxodent 7 syr  
9007091 • Traxodent 25 syr

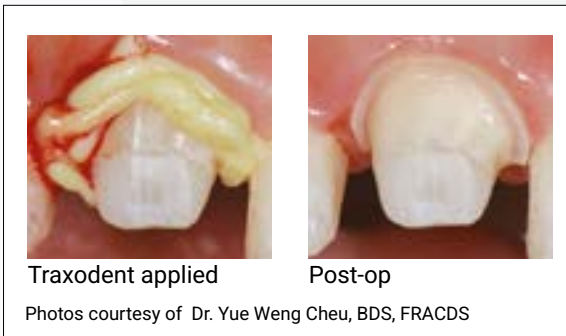

Traxodent applied      Post-op  
Photos courtesy of Dr. Yue Weng Cheu, BDS, FRACDS

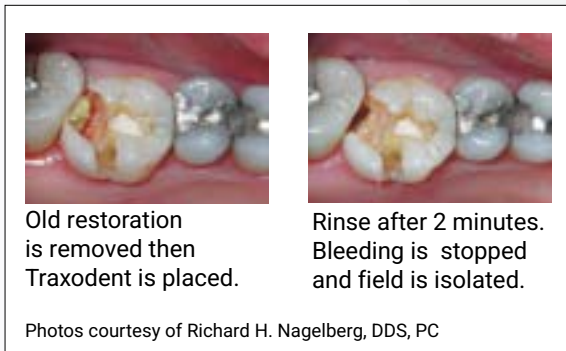

Old restoration is removed then Traxodent is placed.      Rinse after 2 minutes. Bleeding is stopped and field is isolated.

Photos courtesy of Richard H. Nagelberg, DDS, PC



Syringe Traxodent and place retraction cap on prep; have patient bite down on cap for 2 minutes.      Tooth is prepared for a clean impression.

Photos courtesy of Dean Elledge, DDS, MS Wichita State University, AEGD

משהה לדחיקת חניכיים ועצירת דימום מבוססת Hemodent לשימוש כתחליף לחוט רטרקציה

### מאתר המשתמשים בסורק אינטראוראלי





- ✓ **רטרקציה מהירה ואפקטיבית:** מושגת תוך 2 דקות - ללא התעסקות עם חוטי רטרקציה ותמיסות עוצרות דימום - חסכון בזמן כסא
- ✓ **יכולת עצירת דימום ודחיקת חניכיים מעולה:** הפסקת דימום וייבוש הסולקוס מנוזלים הקרוויקולרים תוך כדי דחיקת החניכיים
- ✓ **נוח יותר למתופא:** מונע פגיעה בחניכיים - מפחית את הלחץ על רקמות רגישות
- ✓ **מערכת נוחה לשימוש:** מזרק ארגונומי חד פעמי וטיפים הניתנים לכיפוף, מאפשרים לרופא שליטה מלאה גם באיזורים הדיסטאלים ביותר.
- ✓ **אריזה הרמטית:** כל מזרק נארז בשקית הרמטית הניתנת לסגירה חוזרת - החומר נשמר טרי עד לרגע השימוש.



מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 447	20%	₪ 559	טרקסודנט 7 מזרקים
₪ 1,099	25%	₪ 1,465	טרקסודנט 25 מזרקים

### Knit-Pak+ חוט רטרקציה ספוג

Reference	Size	Color
9007561	000	Green
9007562	00	Brown
9007563	0	Purple
9007564	1	Blue
9007565	2	Orange

- ✓ חוט רטרקציה סרוג, עשוי מיקרופייבר
- ✓ impregnated - ספוג באלומיניום כלוריד
- ✓ סיבי מיקרופייבר בעלי תכולת לחות נמוכה ועמידות גבוהה





- ✓ נדחס בקלות לסולכוס תחת לחץ
- ✓ לא נפרם, לא מבצבץ, לא מתפורר
- ✓ במגע עם בורר - נחתך בצורה נקייה ולא מסתבך
- ✓ 254 ס"מ

**מבצע 2+1**

מחיר בקניית 2+1	מחיר	תיאור המוצר
₪ 70	₪ 105	Knit-Pak Plus

### Knit-Pak חוט רטרקציה

Reference	Size	Color
9007551	000	Green
9007552	00	Brown
9007553	0	Purple
9007554	1	Blue
9007555	2	Orange
9007556	3	Yellow

- ✓ חוט רטרקציה סרוג, עשוי 100% כותנה
- ✓ non-impregnated - אידיאלי לשימוש עם המודנט או טרקסודנט





- ✓ מכיל שרשראות משתלבות הנושאות כמות גדולה יותר של תמיסה המוסטטית
- ✓ נדחס בקלות לסולכוס תחת לחץ
- ✓ לא נפרם ולא מבצבץ
- ✓ במגע עם בורר - נחתך בצורה נקייה ולא מסתבך
- ✓ 254 ס"מ

**מבצע 2+1**

מחיר בקניית 2+1	מחיר	תיאור המוצר
₪ 62	₪ 93	Knit-Pak

### Cord Packer דוחס חוט רטרקציה

1004406 • Taper Angled Serrated  
1004408 • Taper Angled Smooth

דוחס חוט רטרקציה  
Taper Angled  
חלק או משונן



מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 96	30%	₪ 137	דוחס חוט רטרקציה

### Stay Put חוט רטרקציה




RK521000 • Stay put #0  
RK521001 • Stay put #1  
RK521002 • Stay put #2



חוט רטרקציה Stay-put משלב את היתרונות של חוט רטרקציה סרוג עם יכולת ההתאמה של סליל מתכת. החוט כל כך קל לכיפוף שקל מאוד להניח אותו במקום, והוא נשאר שם בלי לזוז.

**שניב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 89	₪ 119	Stay Put

**Cream**  
אלגינט מדויק במיוחד



**CAVEX** AA600 • Cream 500g Regular Set  
AA605 • Cream 500g Fast Set

- ✓ שחזור פרטים ברמת דיוק של 5µm - מתקרב
- ✓ ברמת הדיוק לסיליקון
- ✓ קל לערבוב לתערובת קרמית חלקה
- ✓ עמיד בפני קריעה ואלסטי
- ✓ טעם וריח נעימים
- ✓ זמן התקשות רגיל או מהיר
- ✓ חיי מדף - 5 שנים
- ✓ ניתן לסריקה

**Orthotrace**  
אלגינט אורתודונטי



**CAVEX** AA380 • Orthotrace 500g

- ✓ אלגינט מיוחד לאורתודונטיה
- ✓ זמן התקשות מהיר - דקה אחת בלבד!
- ✓ ניחוח פירות להנאת המתרפא
- ✓ אלסטיות גבוהה
- ✓ יכולת קריאה טובה של המטבע
- ✓ נוח במיוחד לעבודה עם ילדים
- ✓ חיי מדף - 5 שנים

**Color Change**  
אלגינט מחליף צבע



**CAVEX** AA323 • Color Change 9 days 500g

- ✓ משנה צבע פעמיים:
- ✓ סיום זמן הערבוב - **סגול** ← **לורוד**
- ✓ סיום זמן ההתקשות בפה - **ורוד** ← **לבן**
- ✓ יציבות מימדית - 9 ימים (9 ימים ללא התכווצות בשקית פלסטיק סגורה היטב)
- ✓ מנגנון תגובה מהיר, תגובת התקשות מלאה
- ✓ אלסטי ביותר, אידיאלי אורתודונטיה
- ✓ שחזור פרטים של לפחות 25µm
- ✓ פני שטח חלקים, מתאים ביותר לגבס
- ✓ ללא אבק
- ✓ ידידותי למתורפא: דקה אחת בפה


**מבצע 10+1**  
**+ מתנה\***



\* עד גמר המלאי

מחיר בקניית 10+1	מחיר	תיאור המוצר
₪ 57	₪ 63	אלגינט, 500 ג'

**Triple Tray**  
כפות מידה דו צדדיות

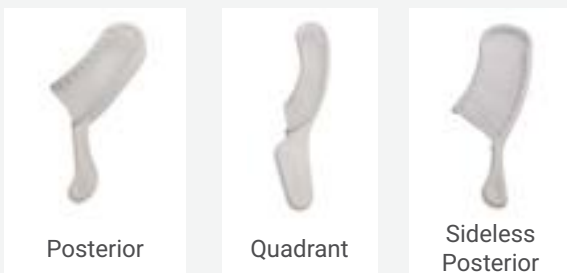

1006238	Wide Body Posterior	48 pcs
1006203	Posterior	48 pcs
1006213	Anterior	35 pcs
1006223	Quadrant	40 pcs
1006243	Sideless Posterior	48 pcs
1006253	Extended Quadrant	35 pcs
1006273	3/4 Arch	35 pcs

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
221 ₪	20%	276 ₪	טריפל טריי

**Creambite**  
חומר למנשך בצבע לבן



03555 • Creambite, 50ml x2

- ✓ חומר למנשך פוליוניל סילוקסן לקבלת מנשך ללא התנגדות
- ✓ אפליקציה ישירה על המשנן לחסכון בזמן
- ✓ אינו זורם למרווחים האינטרא-דנטינליים
- ✓ מוסר בקלות מהפה
- ✓ זמן עיבוד נוח וזמן השהייה קצר בפה (כ-50 שניות) ידידותי למתופא
- ✓ עמיד בפני שברים - ניתן לעיבוד וחיתוך
- ✓ חוזק סופי - כ 90 shore A
- ✓ צבע - לבן קרמי
- ✓ ארומה: גלידה

**Clearbite**  
חומר שקוף למנשך על בסיס סיליקון A



03554 • Clearbite, 50ml x2

- ✓ צמיגות בינונית - medium bodied, מתקשה בפה
- ✓ אפליקציה ישירה על המשנן לחסכון בזמן
- ✓ זמן קצר ביותר בפה - 60 שניות בלבד!
- ✓ חוזק התקשות סופי 80 shore A
- ✓ מתאים גם כחומר מטריצה בזמן הקשייה של קומפוזיט
- ✓ קל לעיבוד (חיתוך, השחזה)
- ✓ צבע: שקוף

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
226 ₪	15%	266 ₪	חומר למנשך

**Ti-Core**  
חומר לבניית ליבות מחוזק טיטניום,  
הקשייה כימית



EDS800 • Ti Core אפור  
EDS810 • Ti Core לבן

קומפוזיט לבניית ליבה מחוזק על ידי טיטניום -  
היחיד החזק יותר מדנטין

- ✓ Ti Core מעניק שחזור יציב ועמיד לאורך זמן
- ✓ Ti Core משחרר פלואוריד - מתועד מחקרית מעל 10 שנים
- ✓ שני גוונים: לבן ואפור
- ✓ Ti Core שווה בחוזקו לדנטין ולכן עמיד בפני ריסוק (ditching) והוצרות חריצים (grooving) בזמן ההכנה

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 587	13%	₪ 675	Ti-Core אפור / לבן

**Ti-Core Auto E**  
חומר ליבה במזרק, בעל הקשייה כפולה




EDS830 • Ti Core Auto E 9g x2

- ✓ מזרק אוטומיקס
- ✓ מכיל לנתיד - חומר מילוי (פילר) ביו-קומפטיבילי המעניק חוזק, יציבות ועמידות
- ✓ התנגדות דומה לדנטין - עמיד בפני ריסוק (ditching) והוצרות חריצים (grooving) בזמן ההכנה
- ✓ צבע A2
- ✓ קל ופשוט לעבודה



מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 689	13%	₪ 792	Ti-Core Auto E

**CompCore AF**  
קומפוזיט לבניית ליבות, dual-cure

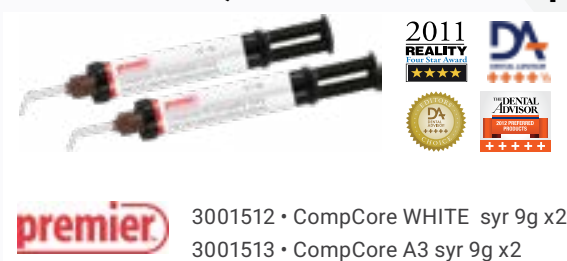

3001512 • CompCore WHITE syr 9g x2  
3001513 • CompCore A3 syr 9g x2

- ✓ משחרר פלואוריד
- ✓ הקשייה כפולה (אור וכימית) לגמישות בעבודה
- ✓ הקשייה מהירה - עד 8 מ"מ ב 30 שניות בלבד
- ✓ רדיואופקיות מצויינת
- ✓ קל לשימוש - נשאר במקום אך זורם תחת לחץ
- ✓ נחתך כמו דנטין ללא ditching
- ✓ עמיד לאורך זמן



מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 419	18%	₪ 511	CompCore 9gx2

**Clearfil Photo Core**  
קומפוזיט לבניית ליבות, מוקשה אור



**שני ב 50%**

#356-EU • Photo Core 4.4g

- ✓ עומק הקשייה של 7 מ"מ
- ✓ אין צורך בבנייה בשכבות כשמתמשים ב Core forms
- ✓ גוון אסתטי שקוף
- ✓ נחתך כמו דנטין לאחר ההקשייה
- ✓ קל לשימוש
- ✓ רדיואופקי
- ✓ אינו נדבק לכלי יד



מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 307	₪ 409	Photo Core 4.4g

## Cure Thru יתדות מסיבי זכוכית מחוזקים בזירקוניה, מעביר אור



3001610 • CureThru #4 (red)  
3001611 • CureThru #4.5 (purple)  
3001610 • CureThru #5 (blue)  
3001610 • CureThru #6 (green)



**סיבי זירקוניה**  
טרם הסילניזציה,  
בתוך המטריצה  
של הרזין



**מעביר אור**  
- מאפשר  
פולימרזציה  
מלאה סביב כל  
אורך היתד

- ✓ **חזק וגמיש** - מודול אלסטיות וחוזק פלקסורלי דומים לשן מאפשרים ליתד להגיב ללחצים טראומטיים כמו השן עצמה
- ✓ **מעביר אור** - מאפשר פולימרזציה מלאה סביב כל אורך היתד
- ✓ **רדיואופקי**
- ✓ **סילניזציה לאדהזיה בטוחה** - היתד עוברת טיפול כימי ונקשרת גם לרזין צמנט וגם לקומפוזיט
- ✓ **אסתטי במיוחד** - צבעה הלבן של היתד מבטיח שלא תהיה השתקפות אפורה
- ✓ **בטוח ופשוט לשימוש** - ההרכב של היתד לא שובר את השורש ומאפשר הסרה א-טראומטית
- ✓ **4 גדלים מקודדי צבע** - מבחר גדלים להתאמה קלה לכל השיניים וחללי התעלות.
- ✓ **עיצוב קצה משופע** - גוף היתד מקביל עם קצה מעט משופע להתאמה לאנטומיה של השורש האפיקלי

- אורך היתד: 19 מ"מ
- קוטר היתד: גודל 4 - 0.96 מ"מ, גודל 4.5 - 10.8 מ"מ, גודל 5 - 1.21 מ"מ, גודל 6 - 1.46 מ"מ
- שיפוע קצה היתד: 30
- אורך החלק המשופע: 4 מ"מ בגודל 4 ועד 5.5 מ"מ בגודל 6

**שניב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
ש 312	ש 416	cure Thru רפיל, 10 יח'

- E-Modulus **52 GPa**
- Flexural Strength **1650 MPa**
- Shear Strength **64 MPa**

**Harvard BioCal Line**  
חומר מצע (ליינר)



**HARVARD**

7081554 • Harvard BioCal Line Syr 1g

חומר מצע המגן על המוך, על בסיס MTA מחוזק רזין, ביו-אקטיבי, מוקשה אור.

- מעולה כחומר מצע מגן, דק בחללים עמוקים
- pH 11 - סביבה עויינת לבקטריות
- יציב מכנית
- מוקשה אור - זמן הקשייה מהיר
- עובר מינרליזציה
- מתאים לכל הקומפוזיטים
- רדיואופקי

**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 224	₪ 299	Harvard BioCal Line

**Bio-LCB**  
חומר מצע (ליינר) ובסיס מוקשה אור



**EDS** ESSENTIAL DENTAL SYSTEMS

EDS910-01 • Bio-LCB Liner, 2x 2g syr

Bio-LCB פותח כחומר מצע מגן הבולם זעזועים מתחת לשחזורי קומפוזיט, אמלגם וצמנטים אחרים. יכול לשמש כתחליף לקלציום הידרוקסיד, גלס יונומר, RMGI, IRM/ZOE וחומרי שחזור אחרים. Bio-LCB מייצר הגנה/מחוסם להגנה מפני רגישות.

**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 224	₪ 299	Bio-LCB 2 מזרקים 2 ג' כ"א

**Harvard CHX LC**  
חומר מצע (ליינר)



**HARVARD**

7071263 • Harvard CHX LC Syr 2ml

חומר מצע על בסיס קלציום הידרוקסיד, מתאים לכיפוי מוך לא ישיר וכחומר מצע לשחזורים.

- מתאים לכיפוי מוך לא ישיר וכמצע לשחזורים
- pH גבוה עם אפקט אנטימיקרוביאלי
- זרימה אופטימלית
- מוקשה אור - זמן הקשייה מהיר
- רדיואופקי

**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 172	₪ 229	CalciumHydroxide LC

**Harvard IonoLine**  
חומר מצע (ליינר)



**HARVARD**

7071260 • Harvard IonoLine Syr 2ml

חומר מצע המגן על המוך, על בסיס גלס יונומר, מחוזק רזין, משחרר פלואוריד, מוקשה אור.

- זרימה מעולה
- אוטם את השן
- מפחית סיכון לרגישות פוסט-אופרטיבית
- חומר בסיס מצויין
- משחרר פלואוריד
- מוקשה אור - זמן הקשייה מהיר
- רדיואופקי

**שני ב 50%**

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 157	₪ 209	Harvard IonoLine



**Pocket-X Gel**  
פוקט איקס ג'ל - לטיפול בכיסי חניכיים


Pocket-X® gel



PRUDENTIX  
Innovative dental products

782 • Pocket-X Gel

**ג'ל המגיע במזרק, להחדרה קלה לכיס הפריודונטלי**

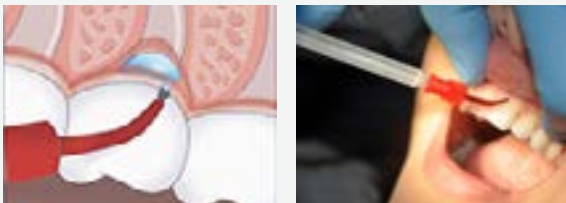

בטמפ' החדר החומר נוזלי, מוכנס בקלות לכיס וממלא את כל נפח הכיס, כולל פינות נסתרות ועמוקות. בטמפ' הגוף הנוזל הופך לג'ל שמתמצק ומתקשה תוך שניות (פורמולציה מוקו-אדהזיבית, תרמו-סנסטיבית)

**הפוקט-X ג'ל מבצע 3 פעולות בכיס הפריודונטלי:**

- מכיל חומצה היאלורונית היוצרת שכבת הגנה
- מכיל חומר אנטימיקרוביאלי Octenidine ששומר על הכיס נקי ואינו מכתים\*
- הג'ל ממלא את הכיס ומונע כניסה חוזרת של חיידקים ופתוגנים



חסכוני ✓  
משתלם ✓  
יעיל ✓

**מבצע 5+1**

תיאור המוצר	מחיר	בקניית 5+1
פוקט X ג'ל, 3 מזרקים של 1 מ"ל כ"א	280 ₪	233 ₪

**חסכוני ביותר!**

תכולת אריזה: 3 מזרקים של 1 מ"ל  
מזרק אחד מספיק למספר כיסים.  
לפני השימוש יש לבצע הקצעת שורשים (ניקוי, החלקה והסרת אבנית מאזור כיס השן)

**Bite Wafers**  
פרסות שעווה למנשך



H00825 • Bite wafers, blue 24 pcs

**Bite Wafers, laminated, Blue**  
פרסות השעווה מכילות רדיד אלומיניום דקיק בין שתי שכבות השעווה.  
יח' 24

**Boxing Wax**  
שעווה למטבעי מסוג boxing



H00815 • Boxing wax 48 pcs

**Boxing Wax**  
במיוחד למטבעים מסוג boxing impressions. עמידה בחום גבוה הנפלט מהגבס הדנטלי בזמן ההתקשות.  
מידות: 1.6mm X 38.4mm X 305 mm  
יח' 48

**Plastic Wax Sticks**  
מקלות שעווה



H00826 • Plastic tray wax sticks 48 pcs

**Plastic Wax Sticks**  
מקלות שעווה הניתנים לעיצוב בקלות ללא צורך בחימום. מקלות השעווה רכים יותר ודביקים יותר למינימום תזוזה של הרקמה  
יח' 48 (ריחני)

**Utility Wax Strips**  
שעווה לכפות מידה



H00817 • Utility wax strips 80 pcs

**Utility Wax Strips**  
מעוצב ברצועות מעוגלות ומשמש לשמירה על ההיקף החיצוני, הארכה ובנייה של כפות מידה ו - post damming  
יח' 80

**Orthodontic tray Wax**  
שעווה אורתודונטית



H00827 • Orthodontic tray wax 48 pcs

**Orthodontic Tray Wax**  
מקלות שעווה דביקים, רכים וצרים.  
יח' 48 (לבן)

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
265 ₪	20%	331 ₪	Boxing wax
128 ₪	20%	160 ₪	Utility wax
136 ₪	20%	170 ₪	Orthodontic wax
151 ₪	20%	189 ₪	Bite wafers
136 ₪	20%	170 ₪	Plastic wax sticks

**DuraLiner II**  
ריפוד קשה לתותבות



Reliance

RE1601 • DuraLiner II

- חומר לריפוד מחדש של התותבת במרפאה
- ריפוד קבוע
  - מתקשה כימית
  - תגובה אקזותרמית נמוכה
  - אינו צורב את רקמות המתרפא

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 356	15%	ש 419	דורה ליינר II

**DuraBase**  
ריפוד רך לתותבות



Reliance

RE1506 • DuraBase

- חומר לריפוד מחדש של התותבת במרפאה
- ריפוד זמני - מחזיק 9 עד 12 חדשים
  - בפה המתרפא
  - מתקשה כימית
  - מתקשר לתותבת באופן קבוע

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 356	15%	ש 419	דורה בייס

**Orange solvent**  
שמן תפוזים



Reliance

RE3405-36 • Orange solvent 8ozl

שמן (ממס) תפוזים להסרת זינק אוקסיד, אוגנול וחומרי מטבע שונים מהידיים, פנים, משטחי ערבוב וכלי יד.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 49	15%	ש 58	שמן תפוזים

**DuraLay**  
פטרן רזין המקורי



Reliance

RE2244 • DuraLay STD package

דורליי פטרן רזין מתקשה תוך כ-5 דקות ויוצר תבנית דחוסה, מדויקת שאינה מתכווצת. תבנית שניתן להשחזר ולהשקיע, ללא חשש משבירה, עיוות, ציפינג, או שינויי טמפרטורה. השרף נשרף באותה טמפ' של שעווה ללא השארת משקעים.

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 190	15%	ש 223	דורליי מקורי, סט

**Hyrax**  
היירקס



602-800-30 • Hyrax Mini -7, straight 10 pcs  
602-808-30 • Hyrax Medium -10, straight 10 pcs  
602-811-30 • Hyrax Maxi -12, straight 10 pcs

**Orthocryl**  
אקריל לאותודונטיה



160-300-00 • Orthocryl Monomer Powder 1Kg  
161-150-00 • Orthocryl Monomer Liquid Clear 1L

**Remanium**  
חוט לקיבוע



523-050-00 •  $\phi$  0.5 mm / (L 50m)  
523-060-00 •  $\phi$  0.6 mm / (L 40m)  
523-070-00 •  $\phi$  0.7 mm / (L 30m)  
523-080-00 •  $\phi$  0.7 mm / (L 30m)  
523-090-00 •  $\phi$  0.9 mm / (L 10m)  
523-100-00 •  $\phi$  1.0 mm / (L 10m)

**Strengthenes**  
חוט צמה קלוע



312-107-00 •  $\phi$  2.4\*0.8 mm / (L 10m)

**Expansion Screws**  
ברגים אורתודונטיים



600-300-60 • Exp. screws Mini 100 pcs  
600-301-60 • Exp. screws Medium 100 pcs  
600-302-60 • Exp. screws Maxi 100 pcs  
600-303-60 • Exp. screws Magnum 100 pcs

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש"ח 489	25%	ש"ח 652	אורתוקריל סט אבקה ונוזל
ש"ח 117	15%	ש"ח 138	חוט לקיבוע remanium
ש"ח 1,024	20%	ש"ח 1,280	היירקס Hyrax 10 יח'
ש"ח 522	15%	ש"ח 614	חוט צמה קלוע 10 מ'
ש"ח 11	20%	ש"ח 14	ברגים אורתודונטיים מחיר ל-1 יח'

**SR NEXCO**  
קומפוזיט מעבדתי מוקשה אור



הקומפוזיט SR Nexco Paste מעניק מראה טבעי, טולרנטיות לעובי שכבה וגמישות של הפולימריזציה - עבודה עם קומפוזיט יכולה להיות כל כך קלה. קומפוזיט SR Nexco Paste הינו קומפוזיט מוקשה אור עם פילרים מיקרו-אופלים המאפשרים לך להשיג גוון אחיד גם בחללים מוגבלים, משום שאפקט הגוון טולרנטי לעובי שכבה משתנה. שחזורים מ SR Nexco Paste הם בעלי גוון עמיד וברק עמידים לאורך זמן כתוצאה מתהליך הפולימריזציה. ניתן לייצר שחזורים בעלי מראה טבעי בכל תנאי התאורה. הקומפוזיט המעבדתי מתאים במיוחד לעבודות עם שלד או בלעדיו ולעבודות הכוללות ג'ינג'יבה מלאכותית.

**אינדיקציות:**

**עבודות על שלד**

- וינירים חלקיים או מלאים על שחזורים נתמכי מתכת
- ג'ינג'יבה מלאכותית על שחזורים נתמכי שתלים

**עבודת ללא שלד**

- כתרים קדמיים
- אינליי/אונליי/וינירים
- איפיון / מודיפיקציה של שיני תותבות על בסיס שרף



**SR Ivocron**  
חומר בנייה מ PMMA איכותי



SR Ivocron מבוסס על שנים רבות של ניסיון קליני. חומר הבנייה מ PMMA ברמה גבוהה מתאים למגוון אפליקציות. הודות לאפשרות הבחירה בשיטת העבודה עם החומר, ניתן להשתמש בו ליצירת וינירים אסתטים מקומפוזיט על כתרים וגשרים, לשימושים זמניים ולקיבוע שיניים בתותבת.

**לבניית שחזורים ב - 3 טכניקות:**

1. טכניקה קרה (שפיכה)
2. טכניקה חמה
3. דחיסה (press, flask)





## SR Vivodent

Proven denture teeth made of quality PMMA



**ivoclar**

Amazing creativity

- ✓ Anterior moulds based on those of natural teeth
- ✓ Harmonious integration in the natural dentition
- ✓ Versatile applications

Comprehensive shade range

- ✓ A-D and Bleach shades
- ✓ High flexibility in routine laboratory work
- ✓ Excellent performance in complete, partial and combination dentures

Proven material

- ✓ Cross-linked PMMA
- ✓ Sound chemical bond to denture base materials
- ✓ Versatile applications



קוד QR לסריקה, להורדת טבלת תבניות שיניים וגדלים.



קיים גם בצבע BL



**Numeryc GF**  
**גלס פיבר לחריטת יתדות וליבות**  
**בבלוקים ודיסקים**




NYSGF-BCS • 5 blocks Numerys GF  
 NYSGF-DSK • 1 disk Numerys GF Ø98.5mm 20mm

Numerys GF מורכב מ **80% סיבי זכוכית רדיואופקים** **חד כיוונים** המוטמעים ב **20% שרף אפוקסי**. החידוש המוגן בפטנט הזה הוא המערכת הראשונה של **יתדות וליבות ללא מתכת לחלוטין**.

**תכונות מכניות מצויינות:**

- ✓ מודול אלסטיות דומה לדנטין להפחתת סיכון לשבר
- ✓ עמידות מכנית טובה יותר בהשוואה לשיטות יתד לליבה מסורתיות
- ✓ קומפוננט יחיד להתאמה אנטומית טובה יותר: אדהיזה טובה יותר בין היתד-ליבה לתעלת השורש
- ✓ ללא חשש של דה-צמנטציה בין היתד-ליבה וחומרי בניית הליבה.

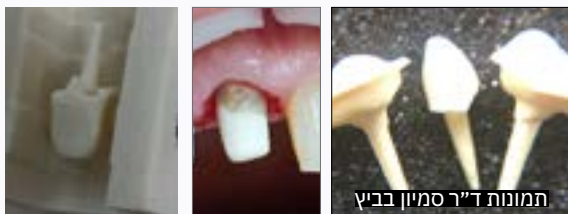

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 762	10%	₪ 996	בלוקים Numerys GF
₪ 1,504	10%	₪ 1,966	דיסק Numerys GF

**Numeryc HC**  
**חרסינה היברידית לחריטה בבלוקים**  
**ודיסקים**




אידיאלי לשחזורים בעלי פני שטח דקים במיוחד: אינליי, אונליי, כתרם, וינירים.

מגוון חדש של בלוקים ל ל CAD/CAM, המורכבים מ **75% חרסינה ו 25% רזין**. ההרכב האופטימלי שלהם הופך אותם לקלים יותר מחרסינות מסורתיות

**יתרונות:**

- ✓ חומר עמיד וגמיש בו-זמנית - סופג זעזועים אמיתי
- ✓ קל לחריטה וקל לליטוש בכמה דקות
- ✓ ללא צביעה, ללא שריפה בתנור (ל chairside) לחסכון בזמן
- ✓ איכות קצה טובה יותר עד 0.25 מ"מ עובי
- ✓ תוצאות אסתטיות מצויינות לאורך זמן
- ✓ מתאים לכל מערכות ה CAD/CAM הדנטלי (מלבד פלנמקה)

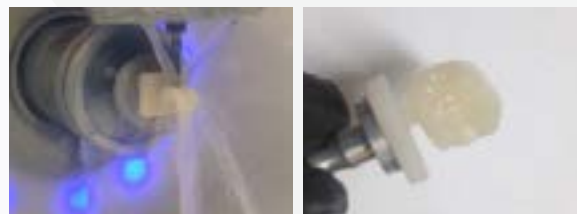

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
₪ 528	10%	₪ 587	בלוקים Numerys HC
₪ 2,265	10%	₪ 2,517	דיסק Numerys HC



## G-CAM ביו-פולימר מחוזק גרפן לשחזורים קבועים




דיסקים של G-CAM זמינים בצבעים הבאים:  
A1, A2, A3 גובה: 16, 20 מ"מ.

**קוטר: 98.5 מ"מ או 95 מ"מ** (זירקון זאן)  
צבעים נוספים וגבהים נוספים - בהזמנה מיוחדת.

### גרפן Graphene

ניתן לתאר גרפן כחומר דו-מימדי בו אטומים של פחמן נקשרים בקשרי SP<sup>2</sup> ליצירת מבנה שטוח דמוי כוורת. תכונות הגרפן הופכות אותו לחומר בעל פוטנציאל גדול ליצור חומרים מרוכבים. בין תכונותיו המרכזיות נמצאות מוליכות גבוהה של חום וחשמל, התנגדות גבוהה למשיכה, צפיפות נמוכה ומקדם התפשטות תרמלית נמוך. בנוסף, משום שהוא מכיל פחמן, גרפן הוא חומר אקולוגי וניתן למחזור.

שילוב של גרפן באקריל שעובר פולימריזציה עצמית הוא אסטרטגיה חדשנית המשפרת את התכונות המכניות שלו, ובו זמנית מעלה את מודול האלסטיות כמו גם התאחיזה, מפחית את הופעת הסדקים ו/או התרחבותם, ובנוסף מפחית את ההתכווצות המתרחשת בזמן פולימריזציה.

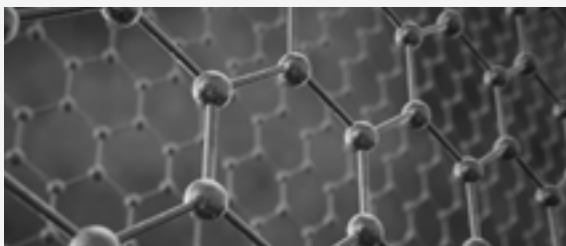

G-CAM הוא דיסק לחריטה העשוי מביו-פולימר המחוזק בחלקיקי ננו של גרפן, המיועד בעיקר לשחזורים דנטלים קבועים.

ניתן להשתמש ב G-CAM למגוון אינדיקציות - כתרם, גשרים, אינליי ואונלי, וינרים, שחזורים ע"ג שתלים וכד'.

### תכונות ה G-CAM:

- ✓ חומר חזק וגמיש
- ✓ קל משקל
- ✓ אינו סופח מים:

  1. אינו משנה את צבעו לאורך זמן
  2. אינו צובר פלאק

- ✓ נחרט כמו PMMA
- ✓ אין צורך בסינטור לאחר החריטה. חסכוני בזמן העבודה וגם מאפשר ניצול מיטבי של הדיסק.
- ✓ ניתן לבנות עליו ישירות עם קומפוזיט (נקשר כימית)
- ✓ הגרפן בתוכו משמש גם כגורם אנטימיקרוביאלי המונע התפתחות בקטריה ועובש.



### תכונות החומר

Elastic modulus	>3200 MPa
Bending strength	>140 MPa
Surface hardness	88 Shore
Water absorption	4 µg/mm <sup>3</sup>
Residual monomer	<0,004 %

## שני ב 50%

מחיר משוקלל	מחיר	תיאור המוצר
₪ 860	₪ 1,147	דיסק G-CAM עובי 16 או 20 מ"מ

**DD cube X<sup>2</sup> ML**  
זירקוניה מולטילייר אסתטית במיוחד



דיסק זירקוניה בשכבות (מולטילייר) לשחזורים מונוליתיים בגווני ויטה - מכתר בודד ועד גשר 3 יח'.

✓ חוזק < 800 MPa  
✓ שקיפות עד 49%



**DD cube One ML**  
זירקוניה מולטילייר לכל האינדיקציות



זירקוניה בשכבות (מולטילייר) עם שקיפות גבוהה לכל האינדיקציות - מכתר בודד ועד גשר טוטלי

✓ חוזק - 1,250 MPa  
✓ שקיפות עד 45%



זירקוניה מולטי לייר של דנטל דיירקט מגיעה ב-17 גוונים, כולל Bleach:



מחיר בקניית 2+1	מחיר	תיאור המוצר
₪ 604	₪ 906	∅ 98.5 mm / 14mm
₪ 739	₪ 1,105	∅ 98.5 mm / 18mm
₪ 872	₪ 1,308	∅ 98.5 mm / 22mm

**מבצע 2+1**

אפשר לערבב בין הסוגים השונים, הזול מביניהם במתנה

**PMMA**  
**דיסק PMMA לשחזורים זמניים**



**PMMA לשחזורים זמניים.**  
**מונולייר או מולטילייר**

- ✓ קוטר 98 (מערכות פתוחות)
- ✓ גובה 16 או 20 מ"מ
- ✓ מחיר זהה לשני הגבהים
- ✓ גוונים A1, A2, A3, A3.5, B1
- ✓ מולטילייר או מונולייר



**מבצע 5+3**

**אפשר לערבב בין הסוגים השונים,  
הזול מביניהם במתנה**

מחיר בקניית 5+3	מחיר	תיאור המוצר
ש 53	ש 84	דיסק PMMA מונולייר 16 מ"מ או 20 מ"מ
ש 131	ש 209	דיסק PMMA מולטילייר 16 מ"מ או 20 מ"מ

**ClaryND ZR ML 4D**  
**זירקוניה מולטילייר לכל האינדיקציות**



**זירקוניה מולטילייר בעלת שקיפות גבוהה,**  
**לשחזורים אסתטיים מכתר בודד ועד גשר**  
**טוטלי**

- ✓ שקיפות 43%-55%
- ✓ חוזק 700-1200 MPa
- ✓ קיים בקטרים 98 ו 95 מ"מ
- ✓ גבהים 12, 14, 16, 18, 20, 22 ו 25 מ"מ



תמיר הקר, תמירדנט תל אביב

**למבצעים - צרו קשר עם אהרון**  
**052-6503983**

מחיר	תיאור המוצר
ש 362	דיסק זירקוניה 12 מ"מ, 98 או 95 מ"מ
ש 395	דיסק זירקוניה 14 מ"מ, 98 או 95 מ"מ
ש 435	דיסק זירקוניה 16 מ"מ, 98 או 95 מ"מ
ש 468	דיסק זירקוניה 18 מ"מ, 98 או 95 מ"מ
ש 508	דיסק זירקוניה 20 מ"מ, 98 או 95 מ"מ
ש 541	דיסק זירקוניה 22 מ"מ, 98 או 95 מ"מ
ש 594	דיסק זירקוניה 25 מ"מ, 98 או 95 מ"מ



**IPS e.max® – the world's most used<sup>1</sup> all-ceramic system**

**96%**  
survival rate<sup>2</sup>

More than  
**10** years  
of clinical evidence

Over **100**  
million  
restorations<sup>1</sup>

**98%**<sup>3</sup>  
customer  
satisfaction

<sup>1</sup> Based on sales figures  
<sup>2</sup> IPS e.max, Scientific Report, Vol. 03/2001-2017  
<sup>3</sup> IPS e.max CAD customer satisfaction survey in Germany and the USA, 2014

**IPS e.max system  
all ceramic - all you need**

כל מה שצריך כדי לבצע שחזור כל-חרסינה מושלם:

- ✓ אינגוטים לדחיסה מליתיום דיסילקט
- ✓ בלוקים לחרטה מליתיום דיסיליקט
- ✓ דיסקים לחרטה מזירקוניה
- ✓ בלוקים לחרטה מזירקוניה
- ✓ חרסינה לבנייה על כל הנ"ל



YouTube




**IPS e.max®  
all ceramic – all you need**



**IPS Style**  
חרסינה סינטטית לבנייה על מתכת



- ✓ מינימום התכווצות
- ✓ מקסימום אסתטיקה - מעבר אור טבעי עם אפקט עומק
- ✓ תוצאות מדוייקות
- ✓ יעילות מקסימלית
- ✓ הנדלינג פשוט
- ✓ **Low Fusing** - שריפה ב  $800^{\circ}\text{C}$  בלבד!

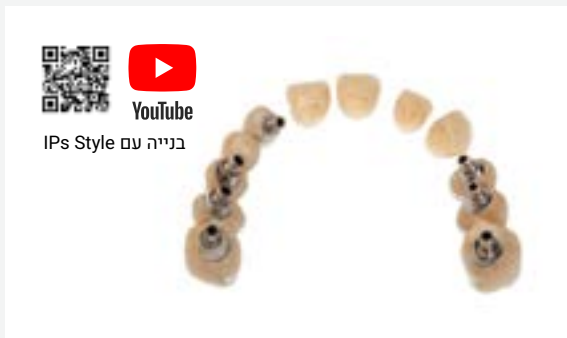

**IPS InLine**  
חרסינה טבעית לבנייה על מתכת



- ✓ תוצאות מדוייקות
- ✓ אסתטיקה גבוהה
- ✓ הנדלינג פשוט



**CeraMotion One Touch Pink**  
 אסתטיקה ורודה לשחזורי אול-סרמיק




CeraMotion One Touch Pink הן משחות תלת מימדיות שפותחו במיוחד לגימור אסתטי ואיפיון של האיזורים הג'ינג'בליים בשחזורי חרסינה העשויים זירקוניה או ליתיום דיסיליקט.



מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 1,352	27%	ש 1,852	cM One Touch Set Pink

**CeraMotion Stains**  
 סטיינס לאיפיון שחזורי אול-סרמיק

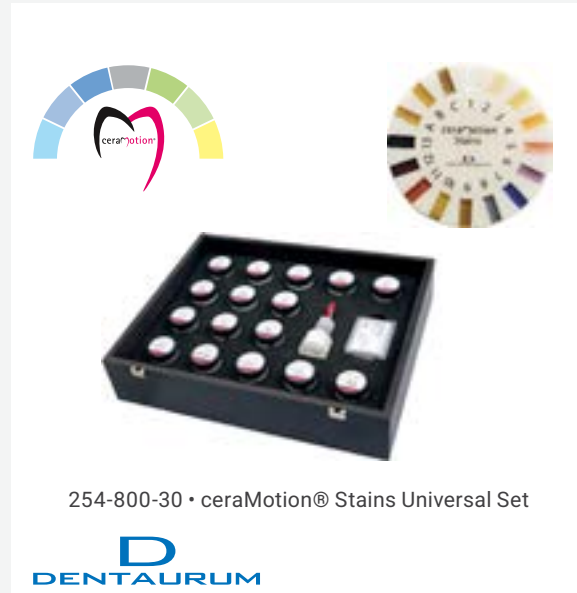

**שריפה ב 730°C**

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
ש 1,198	13%	ש 1,377	ערכת סטיינס אוניברסלית
ש 69	15%	ש 81	נוזל סטיינס 20 מ"ל
ש 225	15%	ש 265	גלגל מפתח צבעים

**מבצע 3+1**  
 על הרפילים

מחיר בקניית 3+1	מחיר	תיאור המוצר
ש 206	ש 274	cM Paste 3D Gingival

**מבצע 3+1**  
 על הרפילים

מחיר בקניית 3+1	מחיר	תיאור המוצר
ש 90	ש 120	cM stain 2g

**CeraMotion One Touch**  
**חרסינה משחתית לשחזורי אול-סרמיק**



250-800-70 • cM One Touch Set



CeraMotion One Touch הן משחות חרסינה לבנייה על שחזורי אול סרמיק ללא מגבלות:  
 - אין מגבלה של הנדלינג  
 - אין מגבלה של עובי  
 - אין מגבלה על שידינג  
 - אין מגבלה על ערבוב  
 cM One Touch No Limits משלים את ה cM One Touch Pink

cM One Touch No Limits מכיל משחות 2D ו 3D, מתואמות בצבעים ומוכנות לשימוש, המאפשרות לך להגיע שלב נוסף באסתטיקה של שחזורי אול סרמיק לאפקטים של שיניים טבעיות.

- ✓ מוכן לשימוש
- ✓ פלואורסנטי
- ✓ קל
- ✓ מהיר
- ✓ אסתטי

**מבצע 3+1**  
**על הרפילים**

מחיר בקניית 3+1	מחיר	תיאור המוצר
206 ₪	274 ₪	cM Paste 3D
164 ₪	218 ₪	cM Paste 2D
124 ₪	165 ₪	cM Glaze

מחיר סופי	הנחה	מחיר	תיאור המוצר
2,551 ₪	32%	3,752 ₪	cM One Touch Set

# מוצרים חדשים בקטלוג:



מוצרים חדשים שיעשו מהפכה במרפאת השיניים שלכם, עכשיו בקטלוג 2024. למידע נוסף בדקו את עמוד המוצר וכנסו לקישורים המצורפים (סרקו את קוד ה QR), או פנו אלינו.

**NEW**

עמ' 4-5



**Brix3000** הסרת עששת באופן ביוטכנולוגי אנזימטי - ללא כאב

**NEW**

עמ' 22



**Riva Cem**  
צמנט להדבקה על בסיס RMGI

**NEW**

עמ' 6-7



**Stela** התחליף המושלם לאמלגם קומפוזיט בהקשייה עצמית

**NEW**

עמ' 11



**Harvard Multichrome**  
קומפוזיט אוניברסלי בעל אפקט זיקית - מזרק אחד לכל הגוונים

**NEW**

עמ' 47



**Teethmate Desensitizer**  
לטיפול ברגישות אפקטיבי ולאורך זמן

**NEW**

עמ' 23



**Harvard Implant Semi-Permanent**  
צמנט חצי קבוע לשתלים